


Pentru instalarea aplicației RoHMS Medical trebuie să aveți drepturi de administrare.


Spațiul necesar pe harddisk este 700 MB

Se intră în folder-ul **1 Dotnetfx** si se lansează executabilul **dotnetfx.exe** :

Apare :

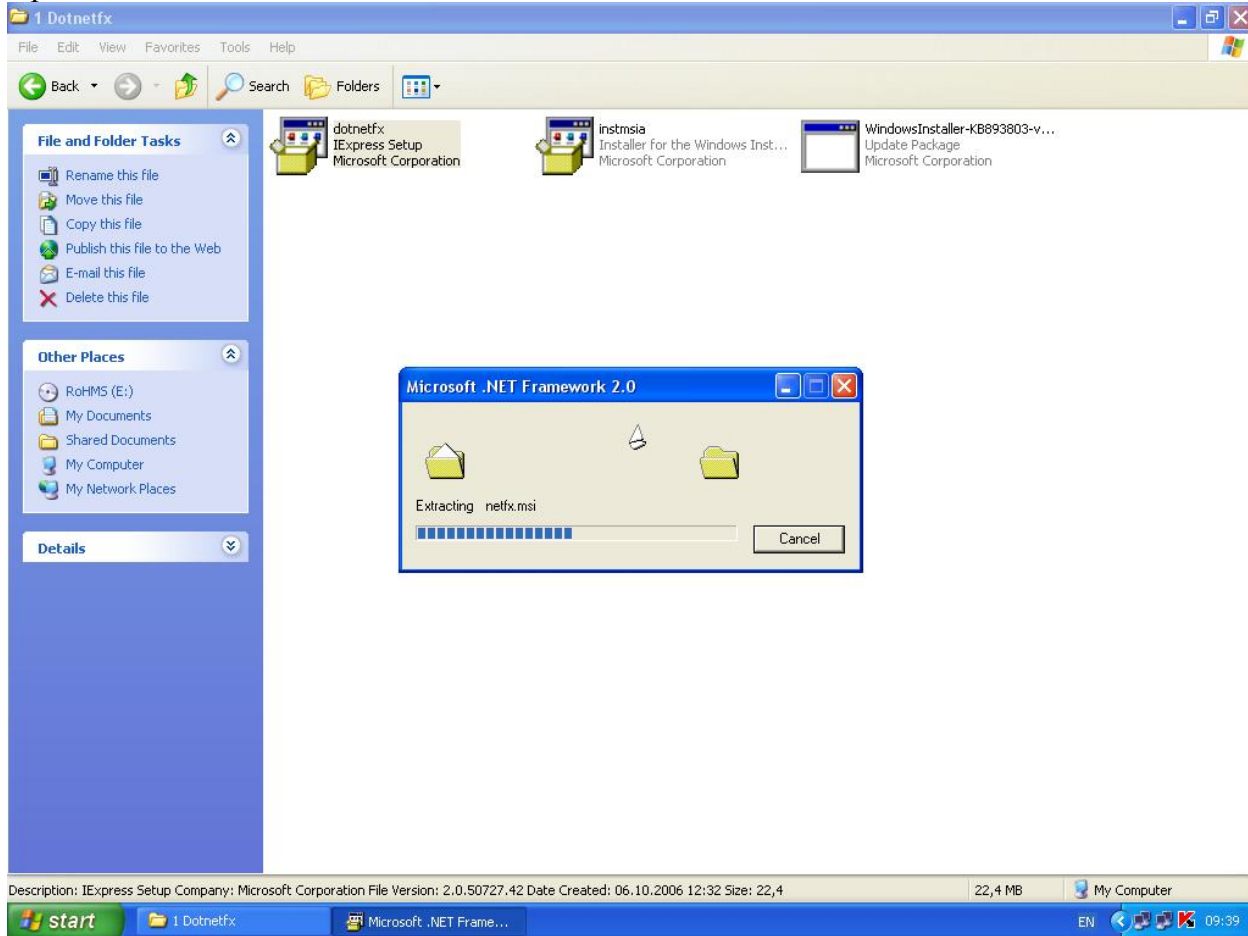


Apare :

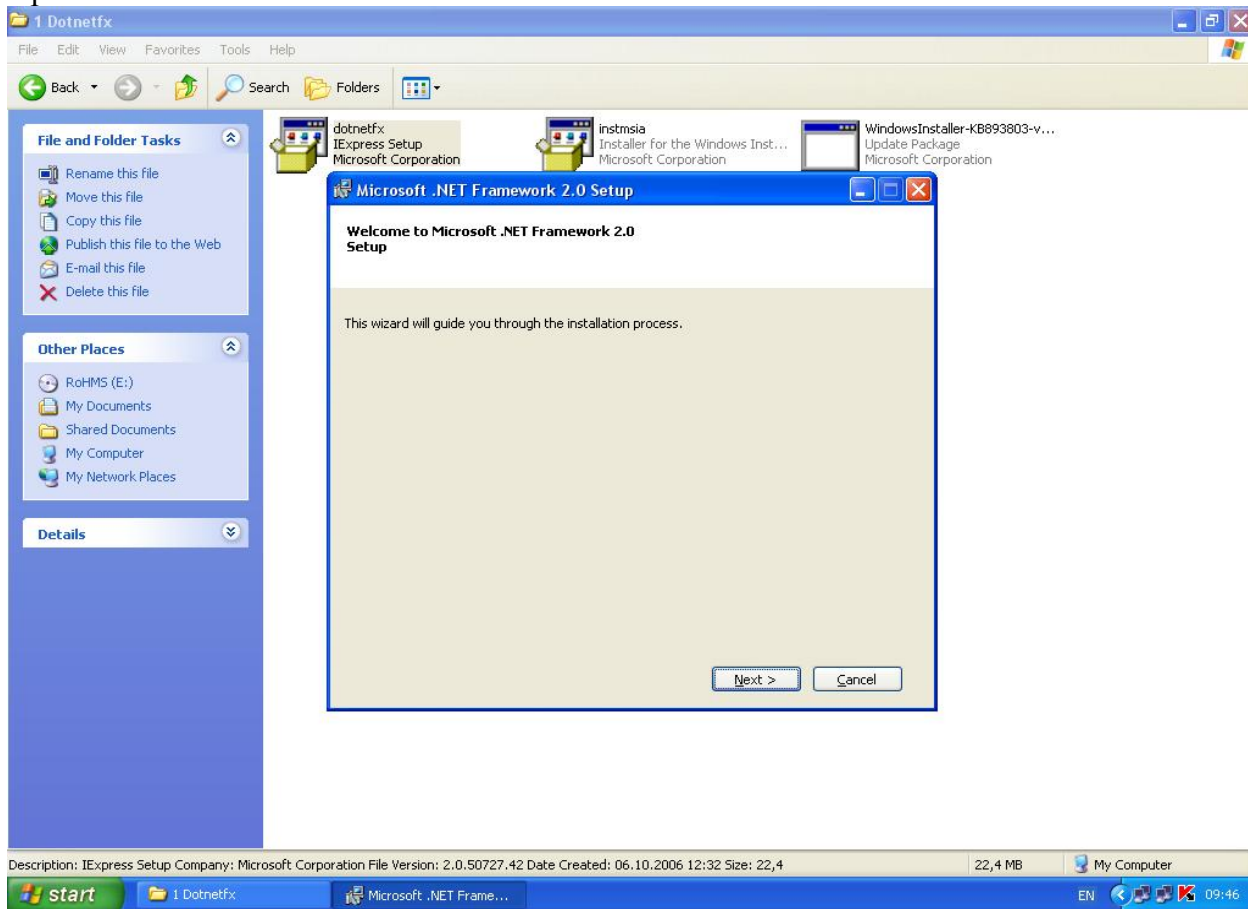


Se da clic pe Next

Apare :

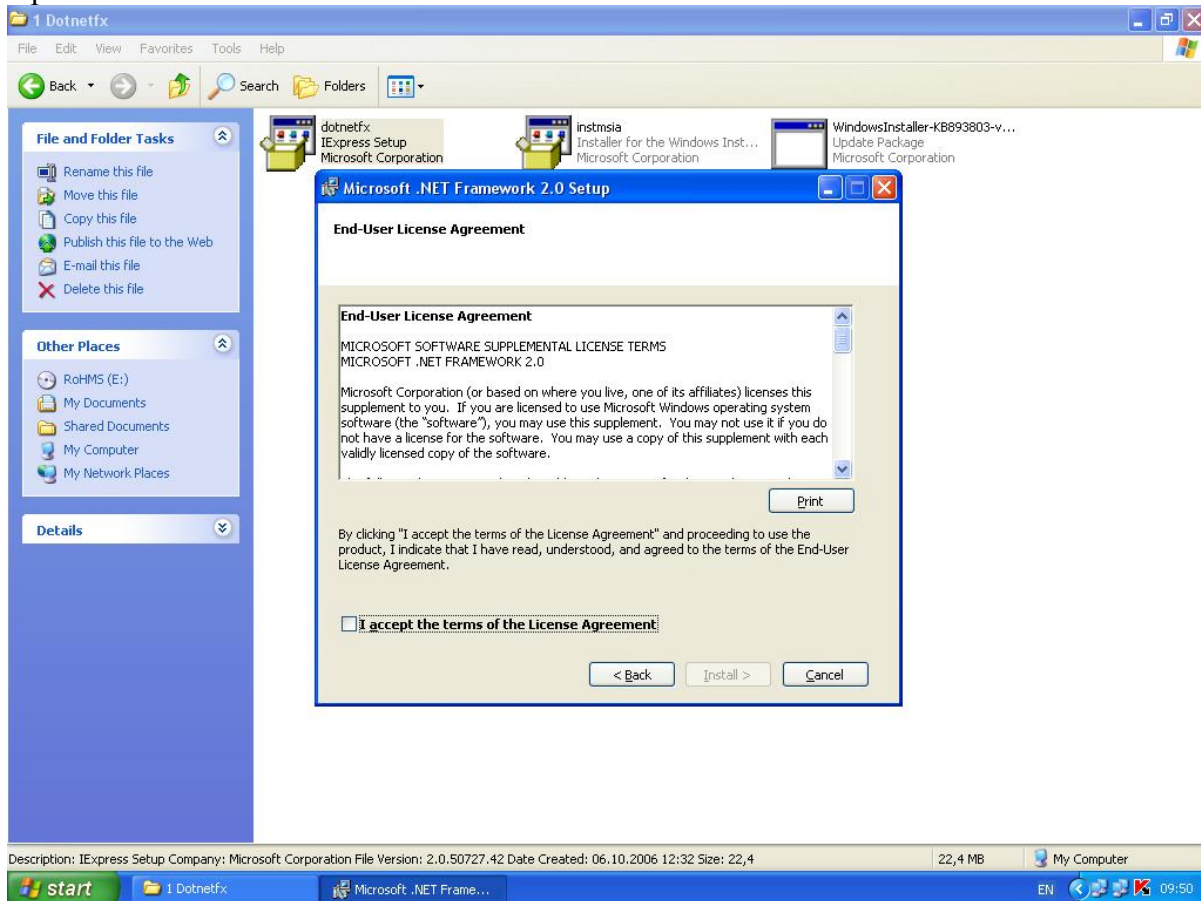


Se bifeaza caseta „I accept the terms of License Agreement” si se da clic pe Install

Apare :

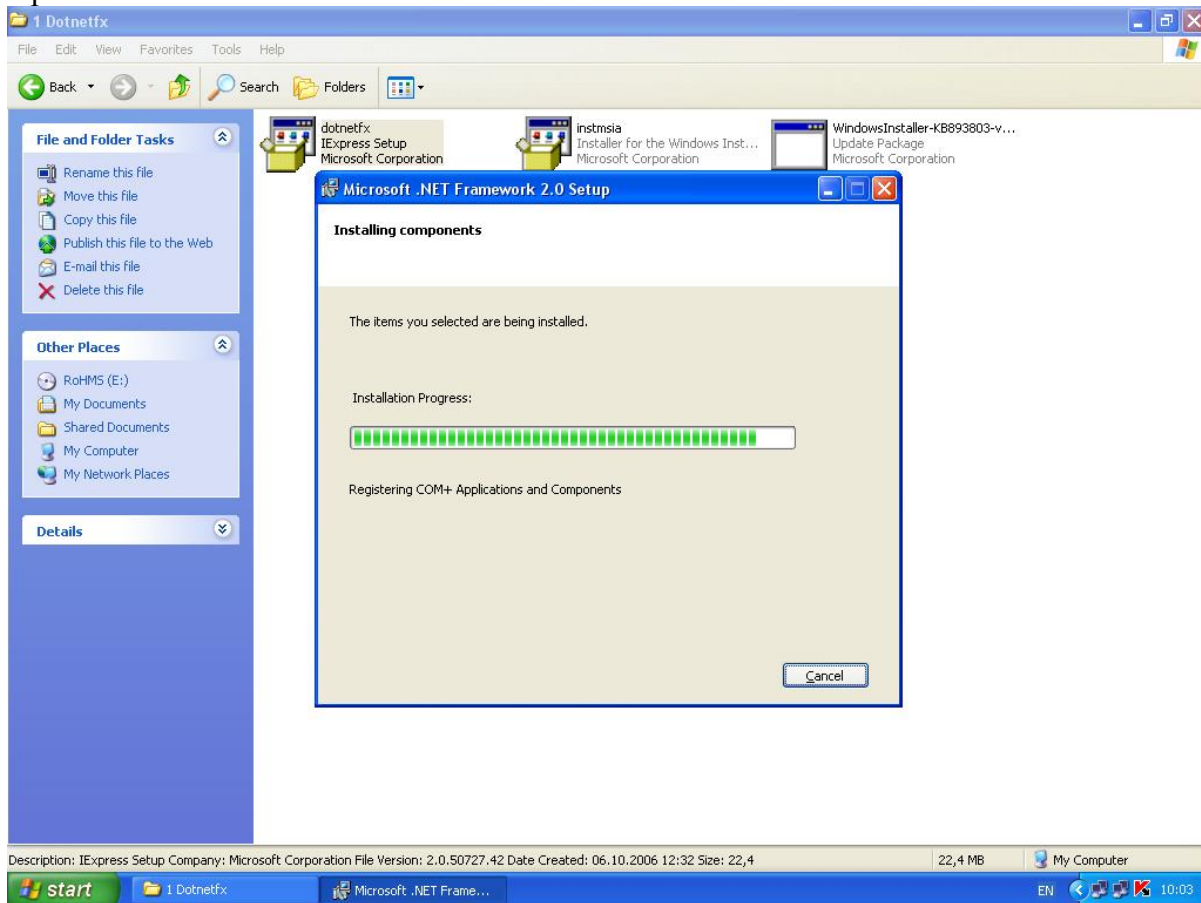

Se asteapta cateva minute.


In final apare :

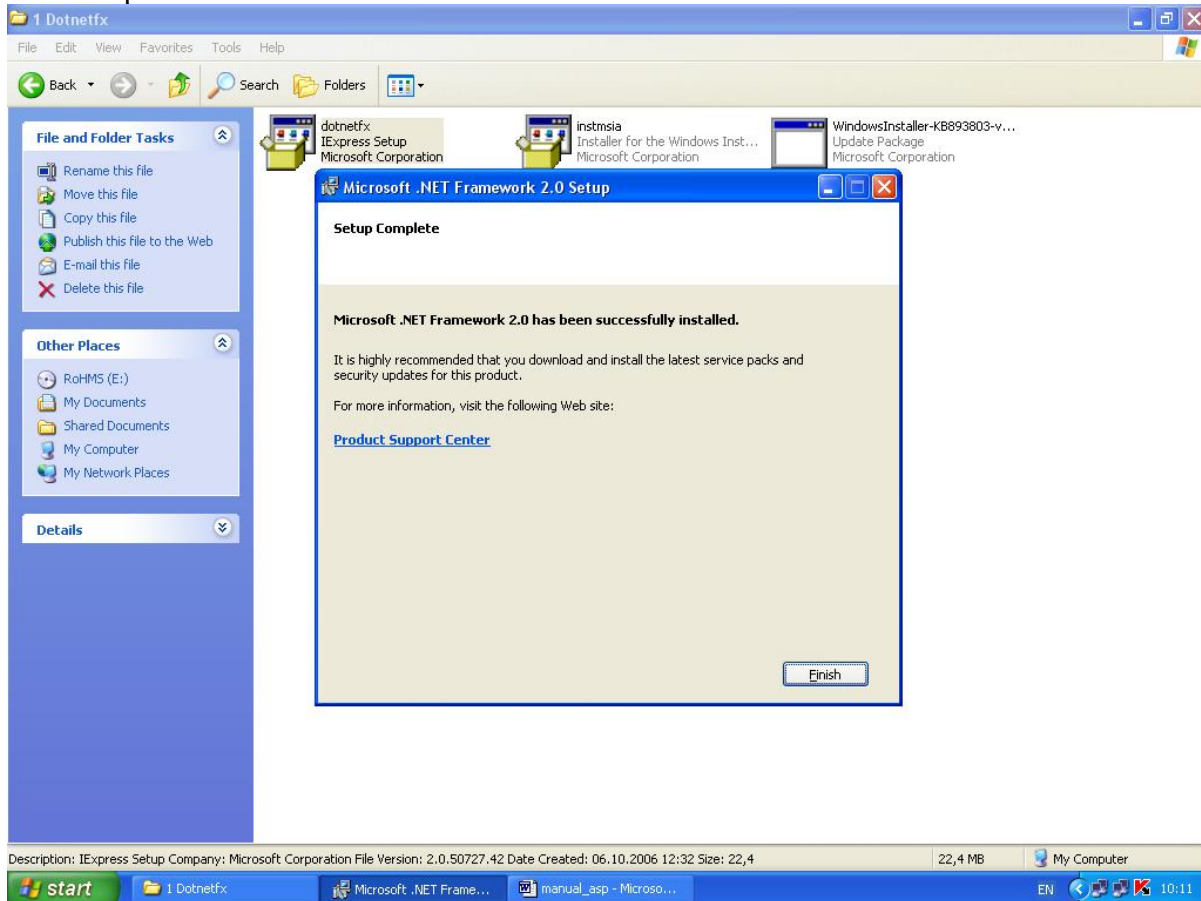

Se da clic pe **Finish**.


Se iese din folder-ul **1 Dotnetfx** și ne pozitionăm în folder-ul **2WindowsInstaller 3_1**. Se lanseaza **WindowsInstaller-k893803-v2-x86.exe**:

Apare :

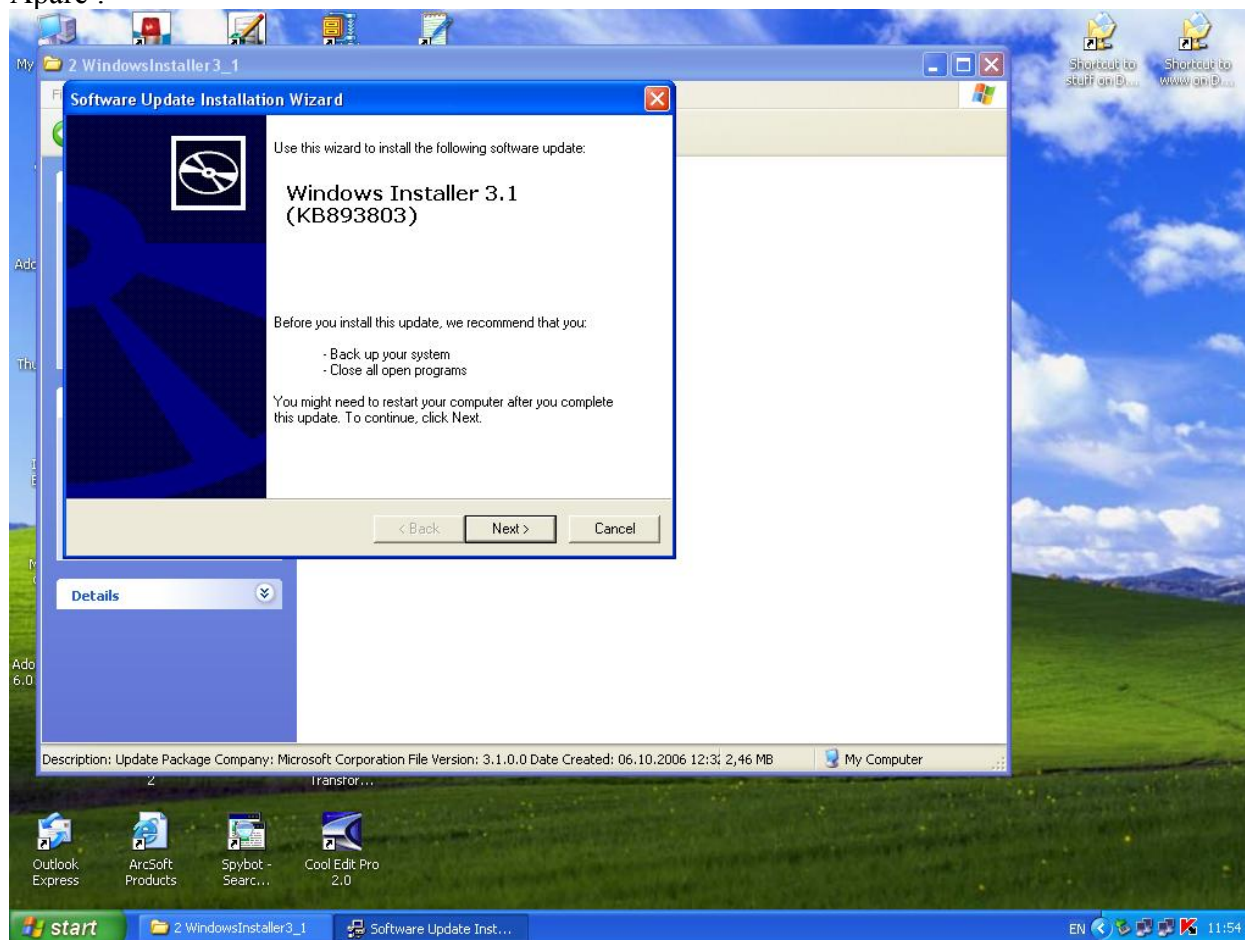


Se da clic pe Next

Apare :

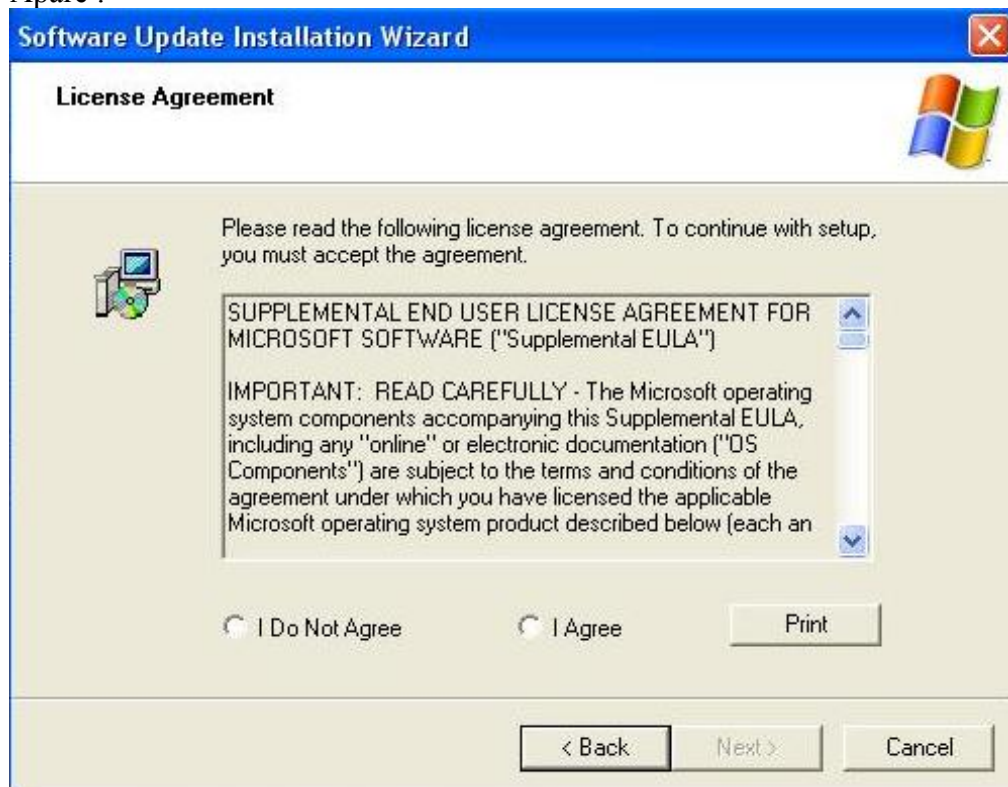


Se bifeaza **I Agree** si se da clic pe **Next**.

Apare :

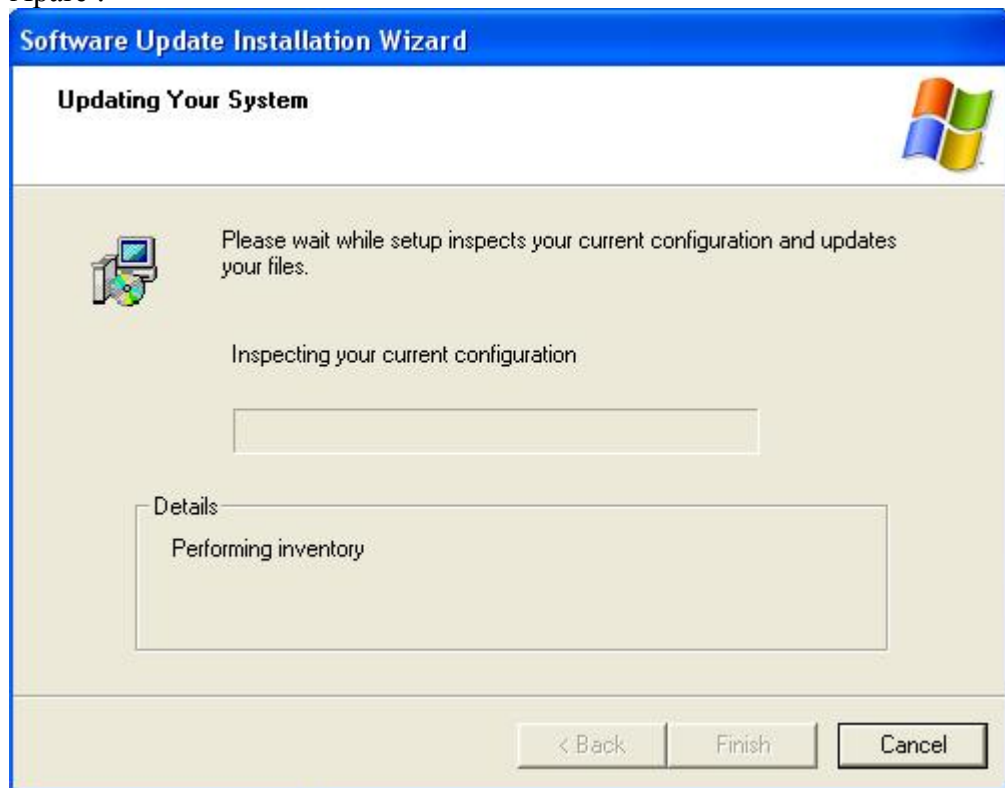


Si, apoi, imediat :

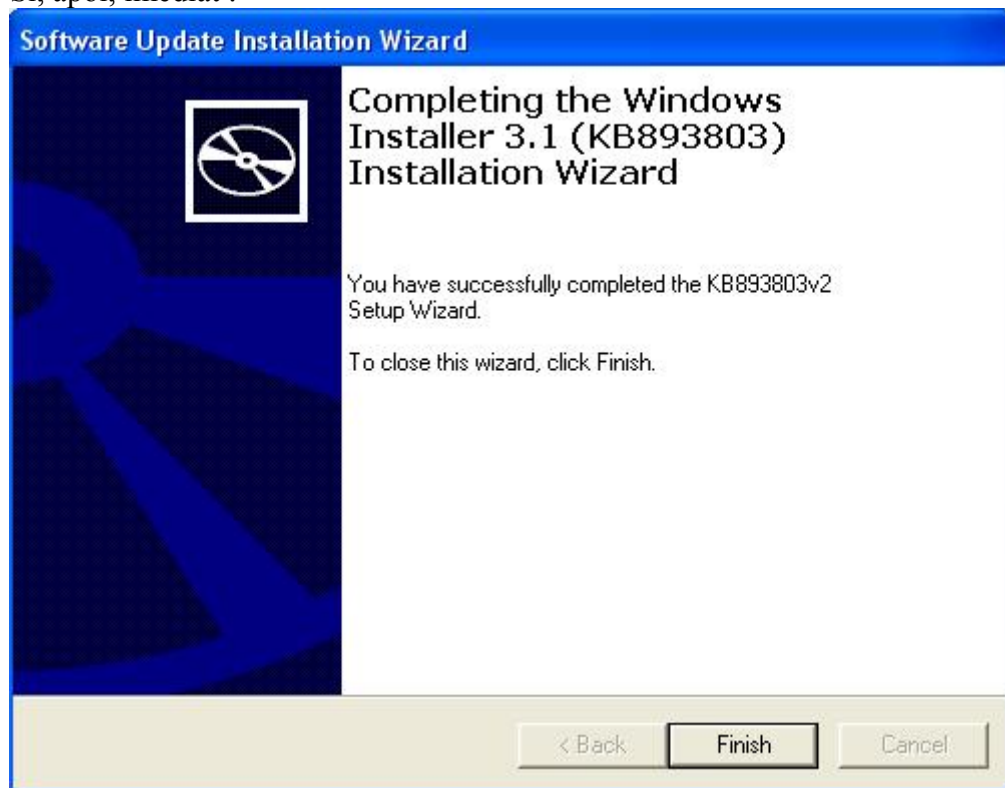


Se executa click pe **Finish** si se termina executia lui **WindowsInstaller-k893803-v2-x86.exe**.

Se iese din folder-ul **2WindowsInstaller 3_1** și se intră în folder-ul **3 SqlExpress** pentru instalare **SQLServerExpress**. Se lansează executabilul sqlexpr32.exe :

Apare :

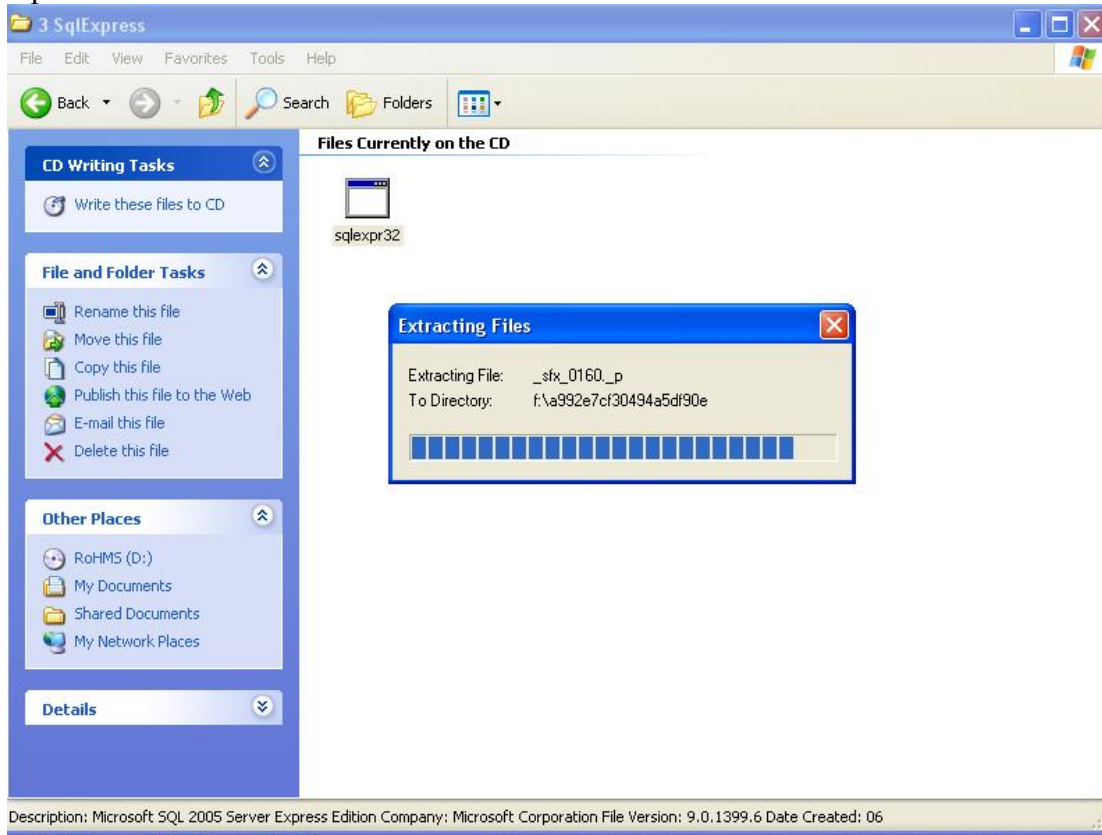


Tim de aproximativ 15 secunde se extrag diverse programe și, în final, apare :

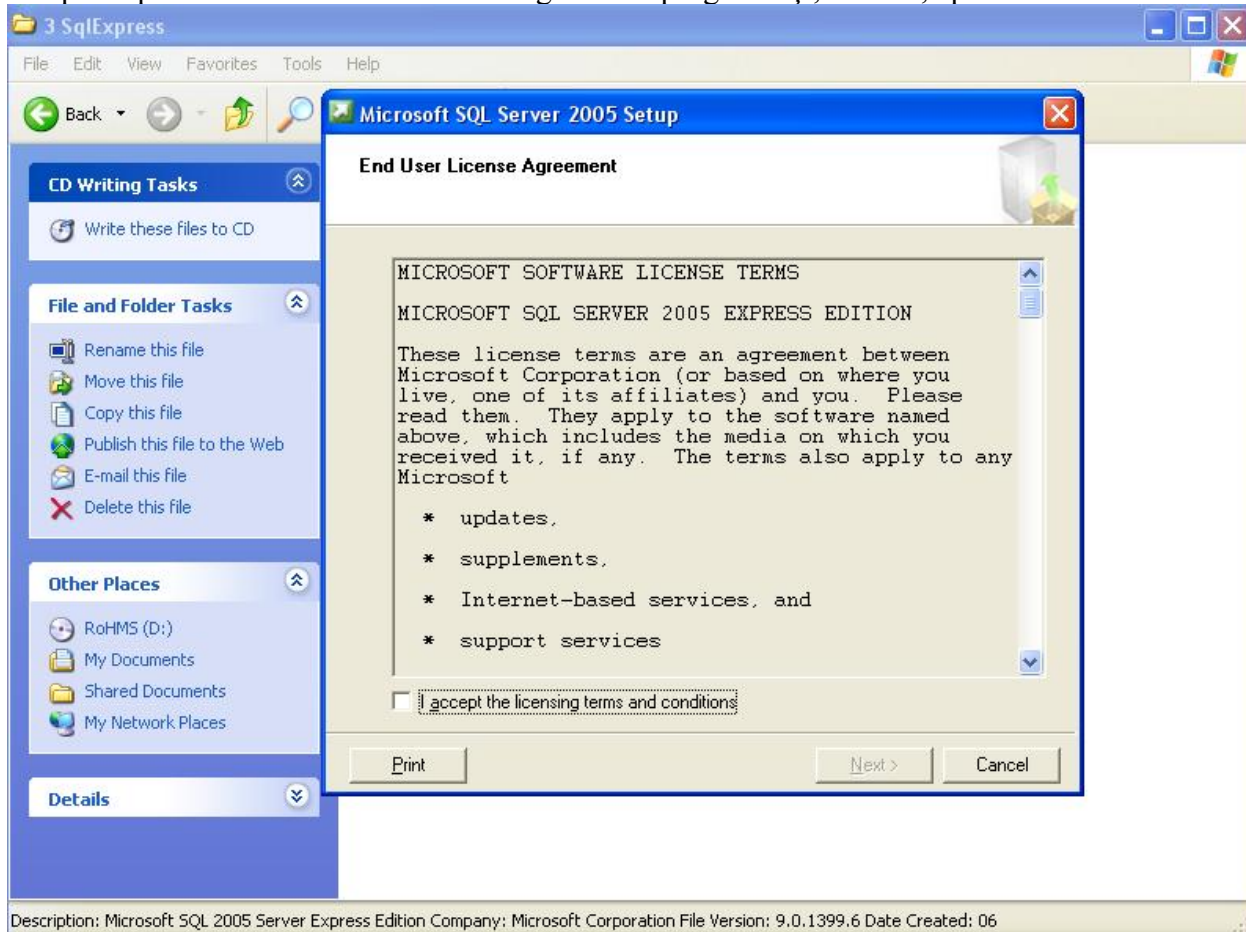


Se bifează **I accept...** și apoi **Next** .

Apare :

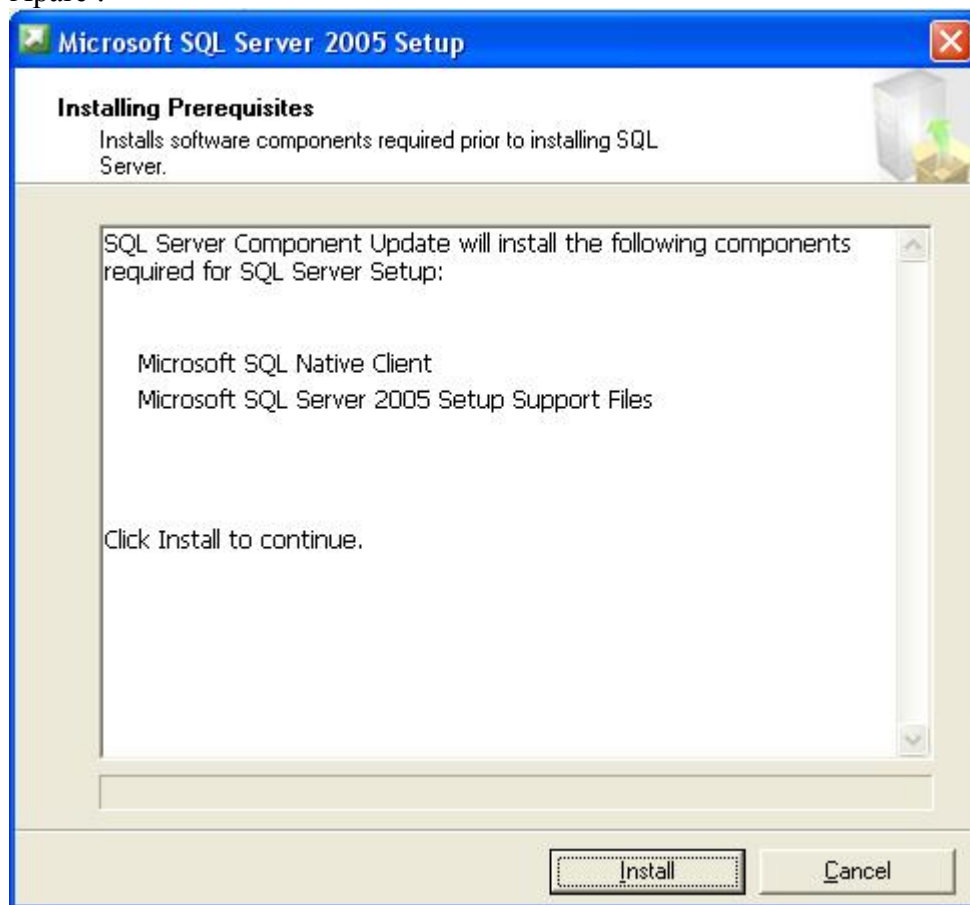


Se dă click pe **Install**.

Apare timp de cca 8 sec. :

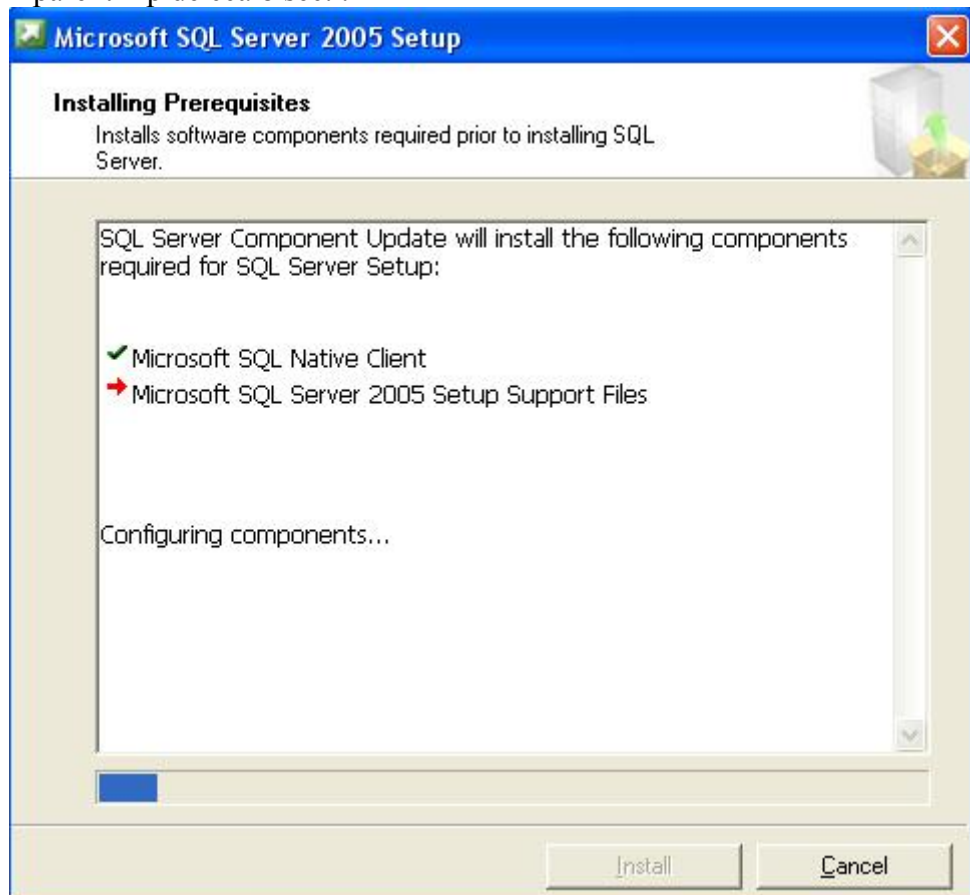


În final, apare :

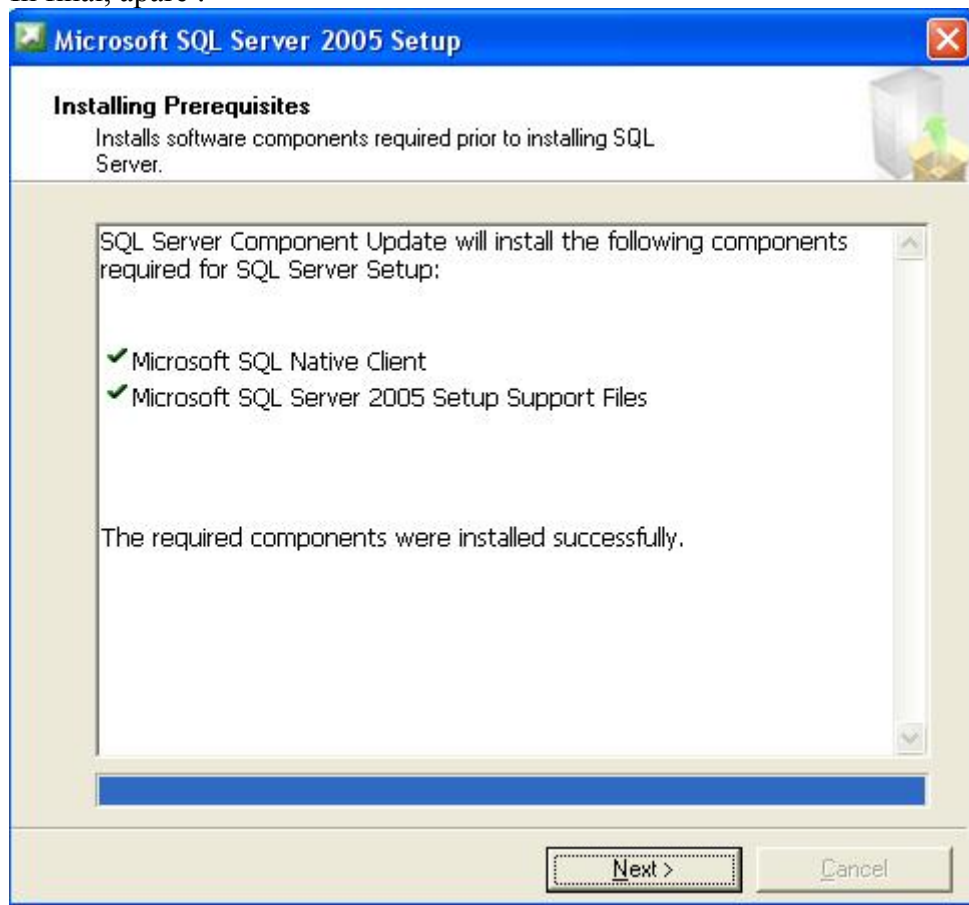

Se dă click pe Next.

Apare :

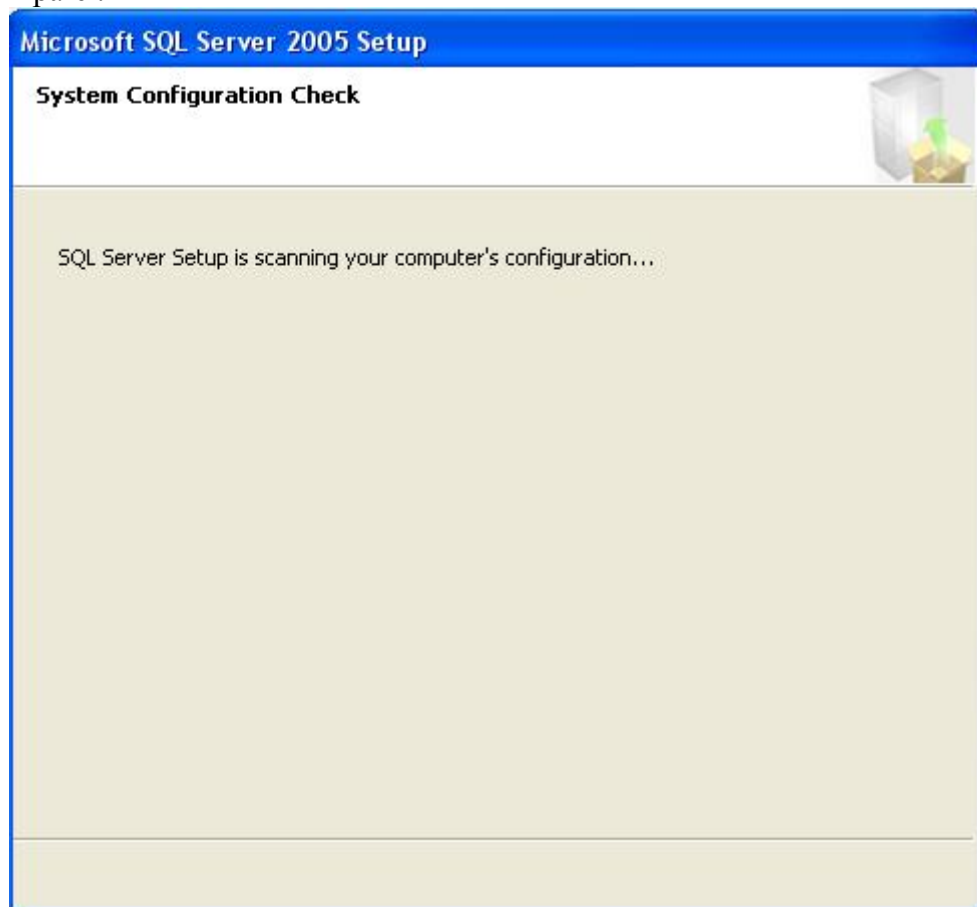

Apoi apare :



Se dă click pe **Next**.

Apare :



Se dă click pe **Next**.


Apare :



The screenshot shows the 'Registration Information' window of the Microsoft SQL Server 2005 Express Edition Setup. The window has a blue title bar with the text 'Microsoft SQL Server 2005 Express Edition Setup'. Below the title bar, the text 'Registration Information' is displayed, followed by the instruction 'The following information will personalize your installation.' There is a small icon of a box with a green arrow pointing up. Below this, a message states: 'The Name field must be filled in prior to proceeding. The Company field is optional.' There are two text input fields: 'Name:' with the text 'Consilier Superior ing. Ion Badea' and 'Company:' with the text 'Autoritatea de Sanatate Publica Dolj'. A checkbox labeled 'Hide advanced configuration options' is checked. At the bottom, there are four buttons: 'Help', '< Back', 'Next >', and 'Cancel'.


Se dă click pe **Next**.

Apare :

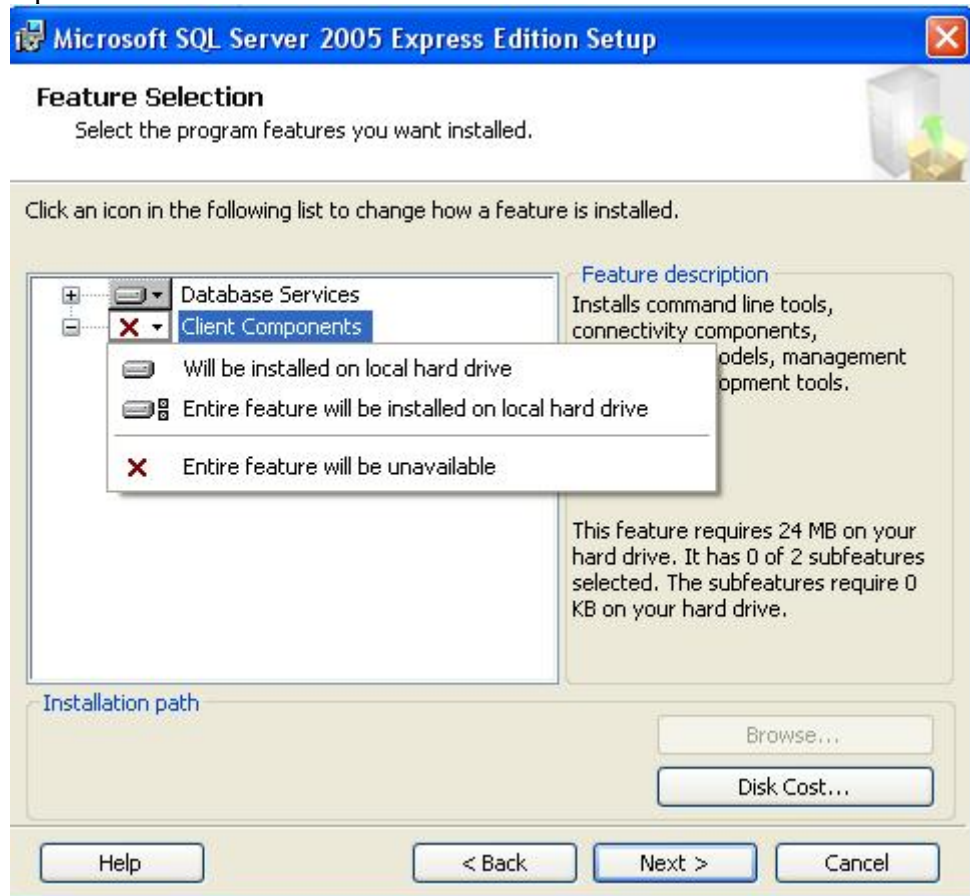

The screenshot shows the 'Feature Selection' window of the Microsoft SQL Server 2005 Express Edition Setup. The window has a blue title bar with the text 'Microsoft SQL Server 2005 Express Edition Setup'. Below the title bar, the text 'Feature Selection' is displayed, followed by the instruction 'Select the program features you want installed.' There is a small icon of a box with a green arrow pointing up. Below this, a message states: 'Click an icon in the following list to change how a feature is installed.' There is a list of features with icons: 'Database Services' (selected) and 'Client Components' (selected). A context menu is open over 'Client Components' with three options: 'Will be installed on local hard drive', 'Entire feature will be installed on local hard drive', and 'Entire feature will be unavailable' (selected). To the right of the list, there is a 'Feature description' section with the text: 'Installs command line tools, connectivity components, models, management component tools.' Below this, there is a section for 'Installation path' with a 'Browse...' button and a 'Disk Cost...' button. At the bottom, there are four buttons: 'Help', '< Back', 'Next >', and 'Cancel'.

În fereastra ce s-a deschis, se dă click pe **Clients Components**, apărând o listă ascunsă.

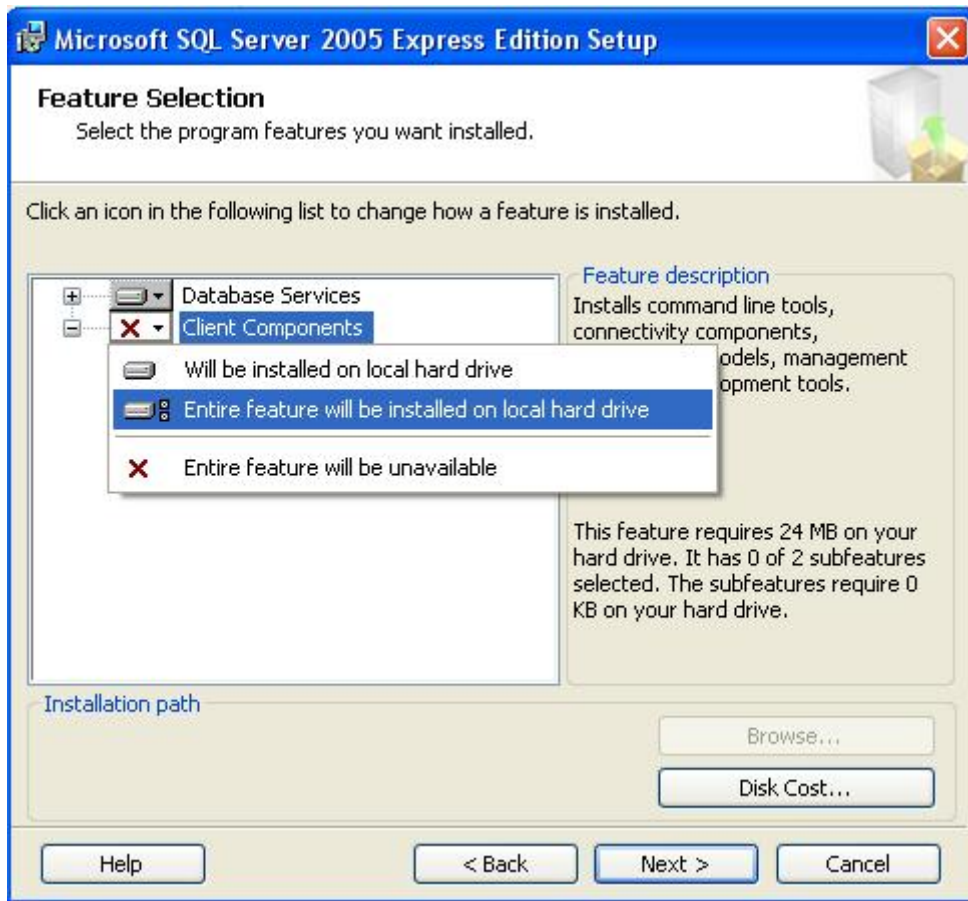


În lista ascunsă se selectează opțiunea **Entire feature will be installed on local hard drive** și, apoi, se execută click pe **Next**.

Apare :



Se bifează **Mixed Mode (Windows Authentication and SQL Server Authentication)**.


Se scrie apoi parola **rohmsrohms**. Se confirmă parola **rohmsrohms** :



The screenshot shows the 'Authentication Mode' screen of the Microsoft SQL Server 2005 Express Edition Setup. The title bar reads 'Microsoft SQL Server 2005 Express Edition Setup'. The main heading is 'Authentication Mode' with a subtext: 'The authentication mode specifies the security used when connecting to SQL Server.' Below this, it says 'Select the authentication mode to use for this installation.' There are two radio button options: 'Windows Authentication Mode' (unselected) and 'Mixed Mode (Windows Authentication and SQL Server Authentication)' (selected). Below these options, it says 'Specify the sa logon password below:' followed by two text boxes. The first is labeled 'Enter password:' and the second is labeled 'Confirm password:'. Both boxes contain the text '*****'. At the bottom, there are four buttons: 'Help', '< Back', 'Next >', and 'Cancel'.

Se da click pe **Next**

Apare :

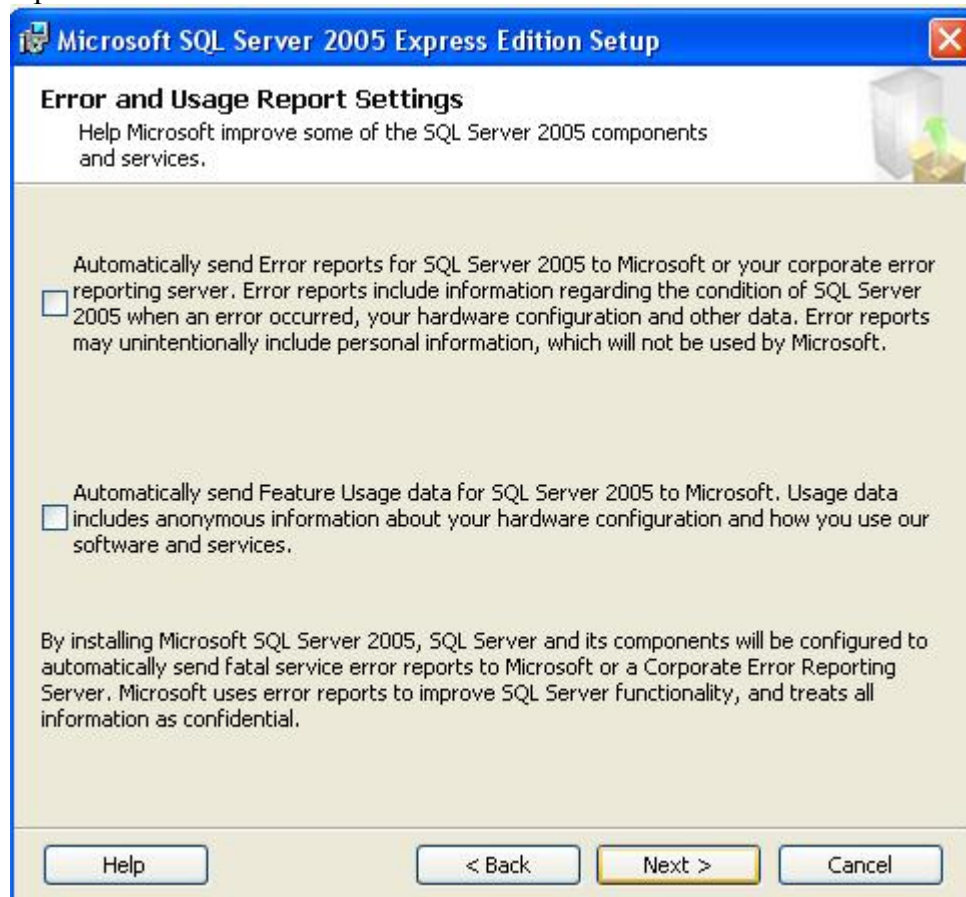

The screenshot shows the 'Error and Usage Report Settings' screen of the Microsoft SQL Server 2005 Express Edition Setup. The title bar reads 'Microsoft SQL Server 2005 Express Edition Setup'. The main heading is 'Error and Usage Report Settings' with a subtext: 'Help Microsoft improve some of the SQL Server 2005 components and services.' Below this, there are two checkboxes. The first is labeled 'Automatically send Error reports for SQL Server 2005 to Microsoft or your corporate error reporting server. Error reports include information regarding the condition of SQL Server 2005 when an error occurred, your hardware configuration and other data. Error reports may unintentionally include personal information, which will not be used by Microsoft.' The second is labeled 'Automatically send Feature Usage data for SQL Server 2005 to Microsoft. Usage data includes anonymous information about your hardware configuration and how you use our software and services.' Both checkboxes are unchecked. At the bottom, there are four buttons: 'Help', '< Back', 'Next >', and 'Cancel'.


Se dă click pe **Next**.

Apare :




Se da click pe **Install**.

Apare, timp de 136 secunde, fereastra de mai jos, unde se configurează automat diverse componente SQL :

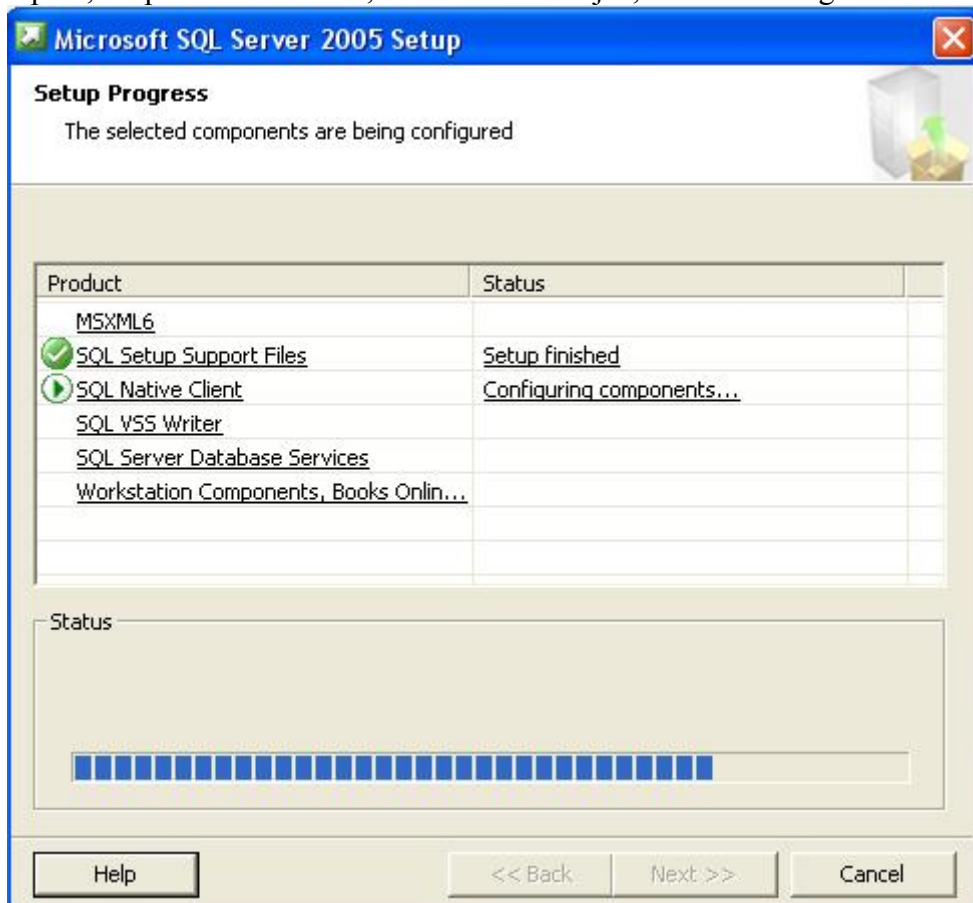


În final, se dă click pe **Next**.

Apare :

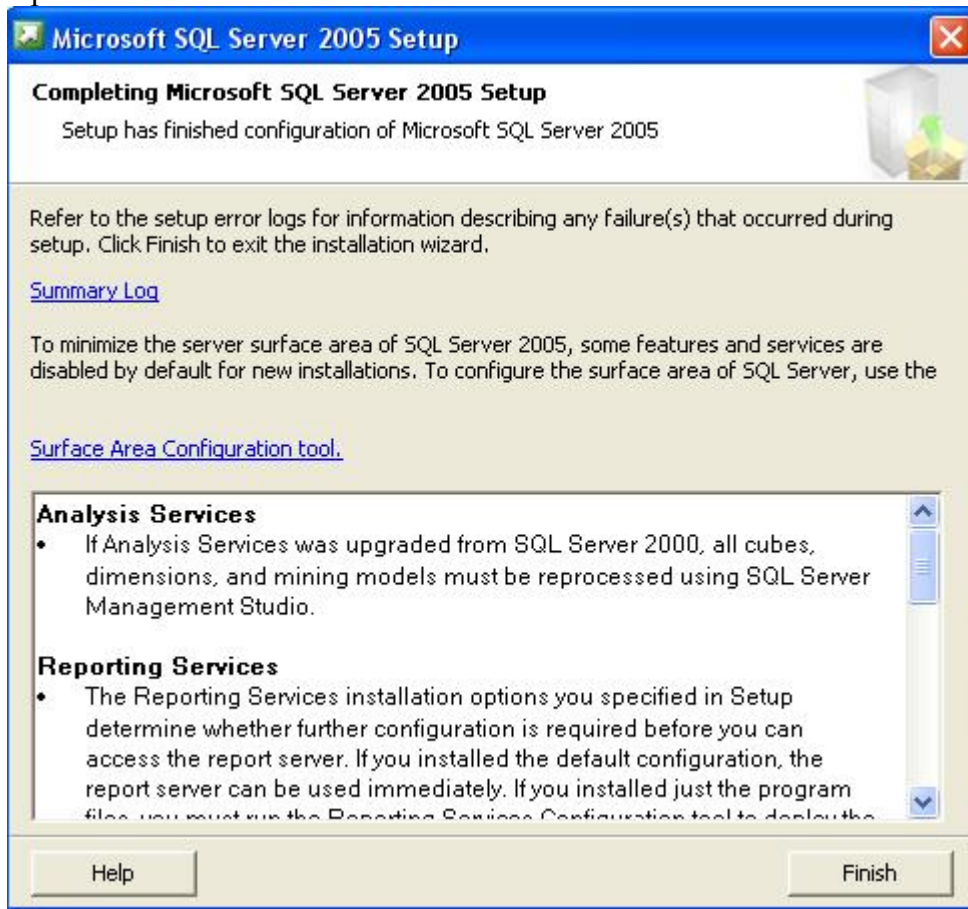


Se dă click pe **Finish**.

Se revine automat în folder-ul **3 sqlExpress** :

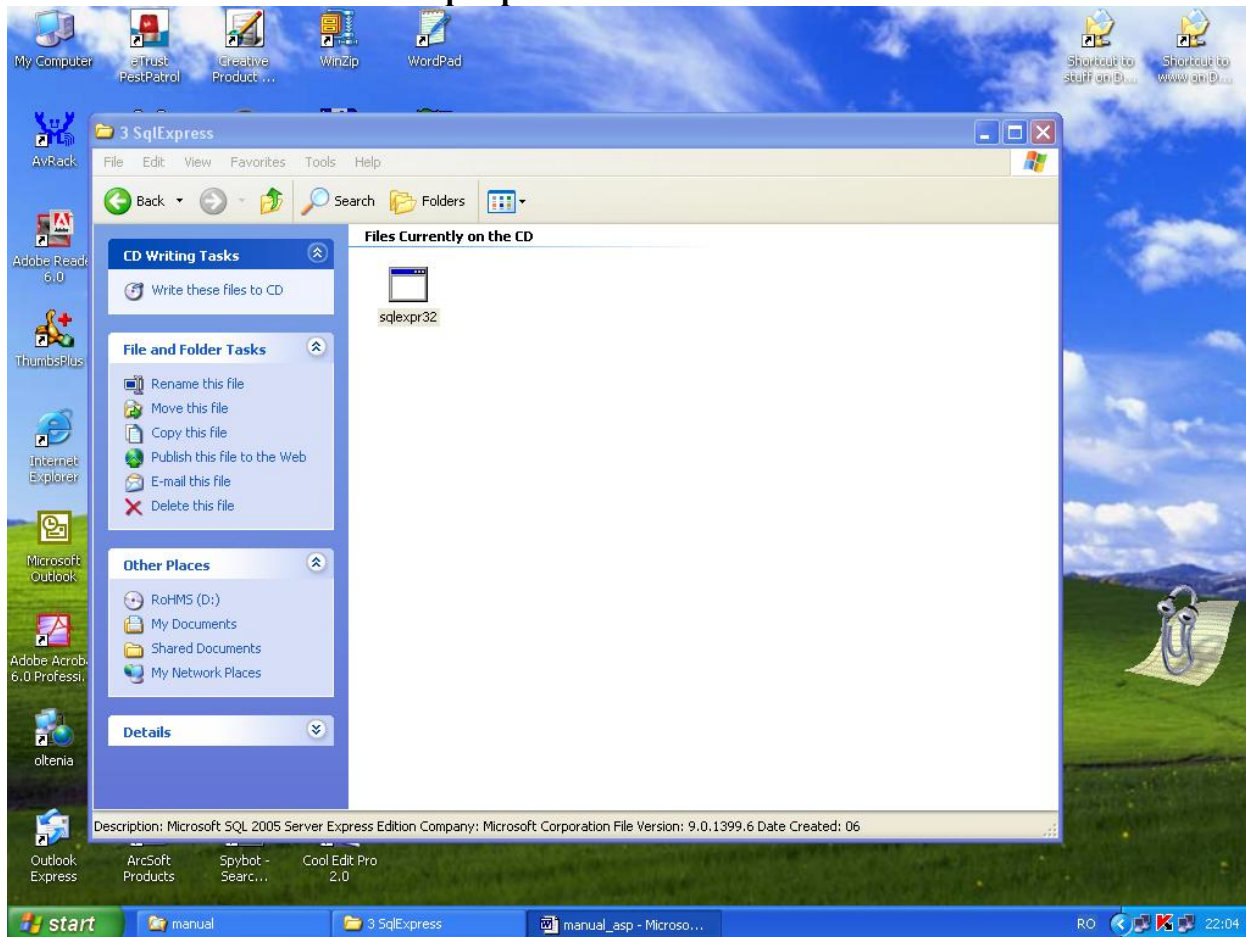


Se intră în folder-ul 4 RoHMS :

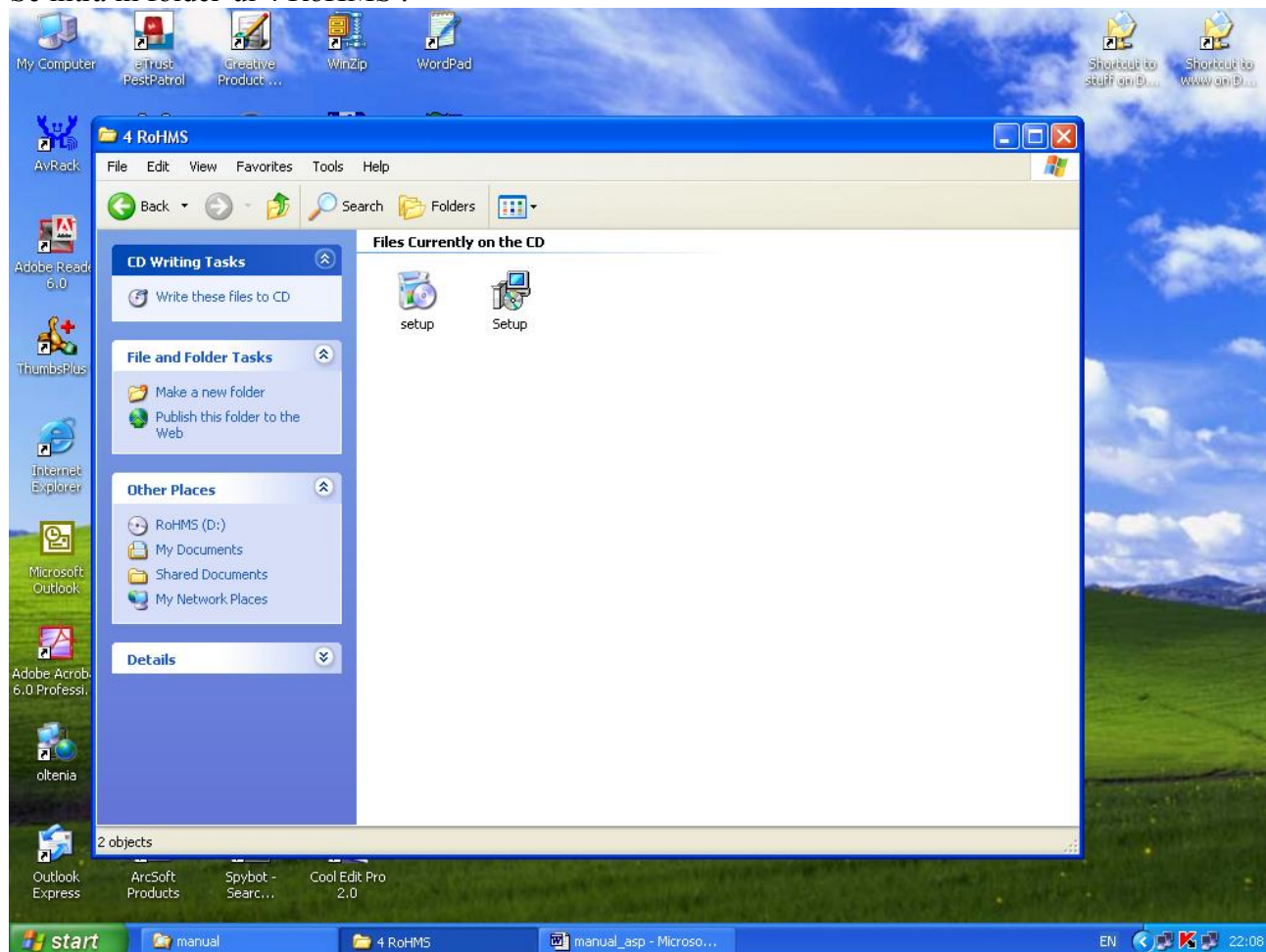


Pentru instalarea aplicației **RoHMS** se lansează executabilul **setup.exe**.

Apare :

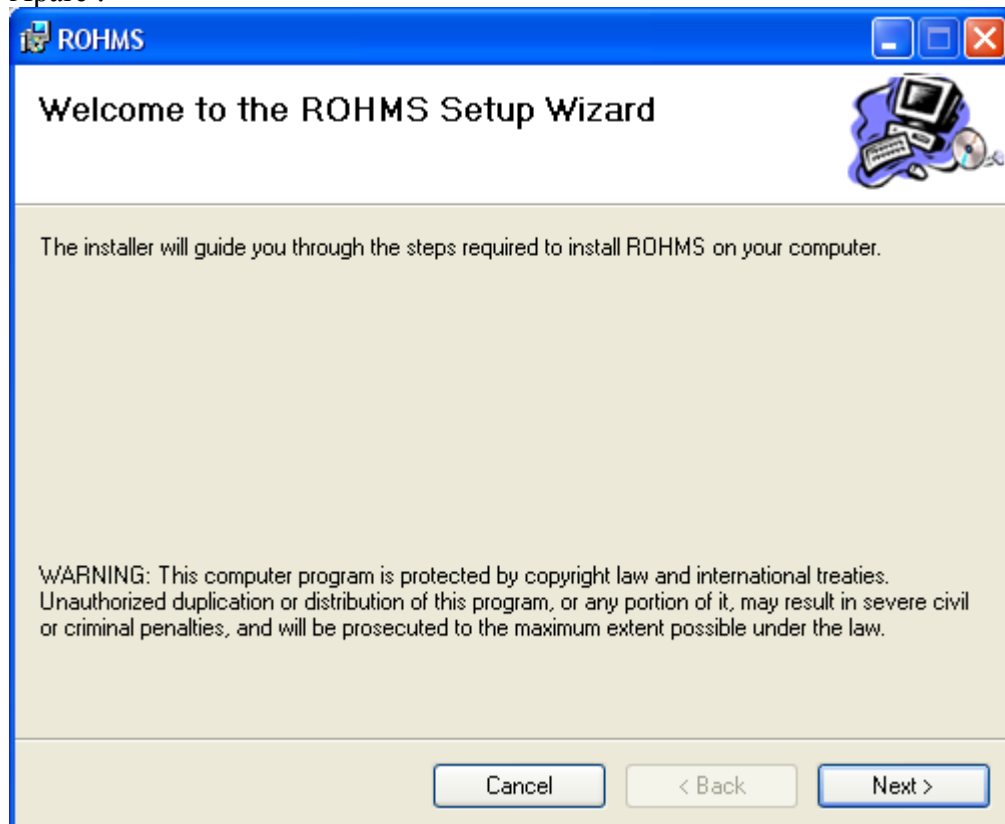


Se execută click pe **Next**.

Apare :

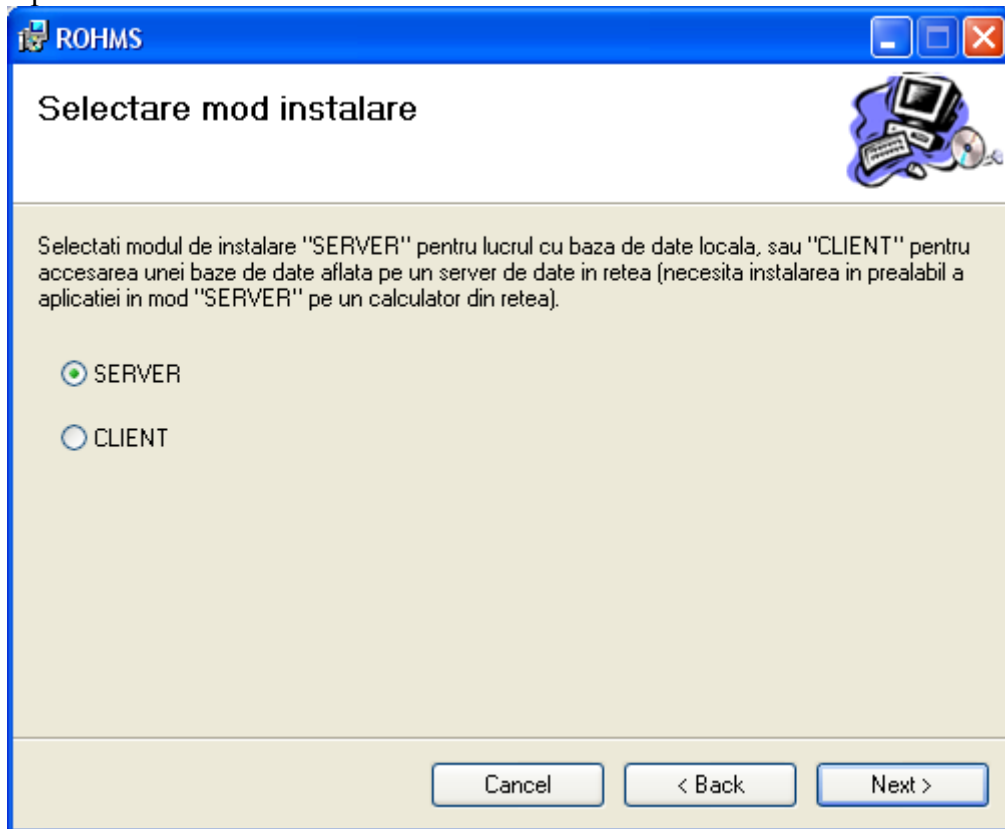


În funcție de ce se dorește a se instala (SERVER sau CLIENT) se bifează opțiunea. În faza aceasta de implementare a aplicației vom alege opțiunea SERVER (deja bifată). Se execută click pe **Next**.

Apare :

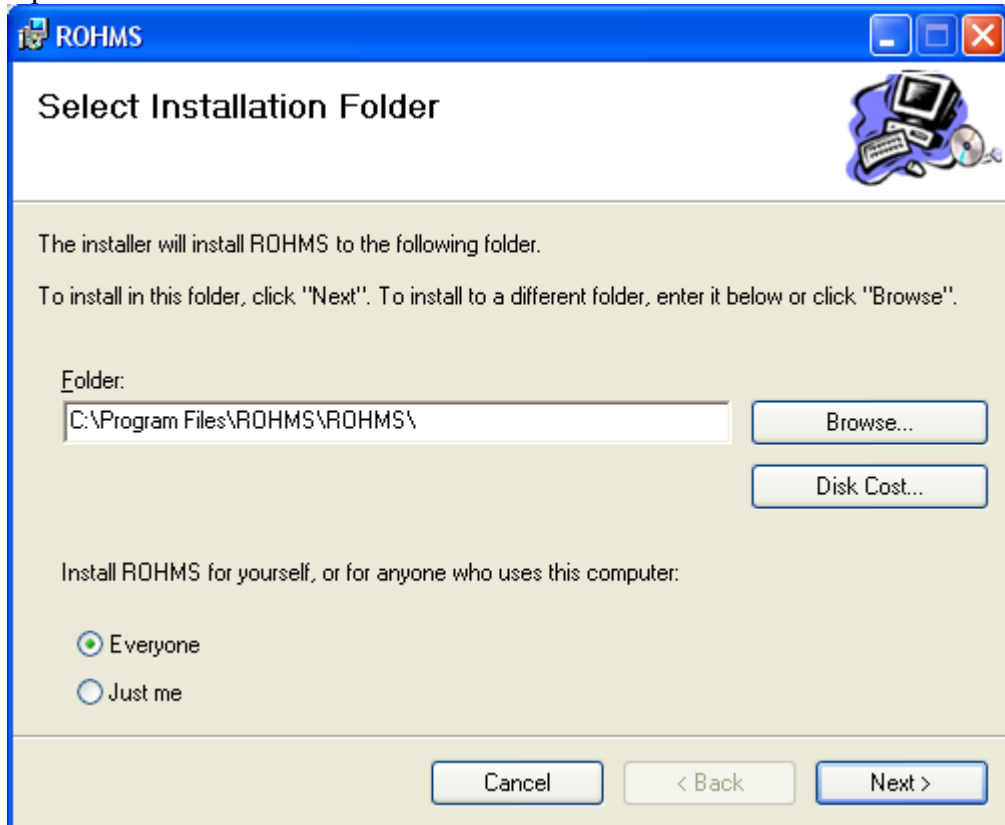


Se selectează Everyone (deja selectat). **Nu se schimbă calea de instalare**. Se execută click pe **Next**.

Apare :

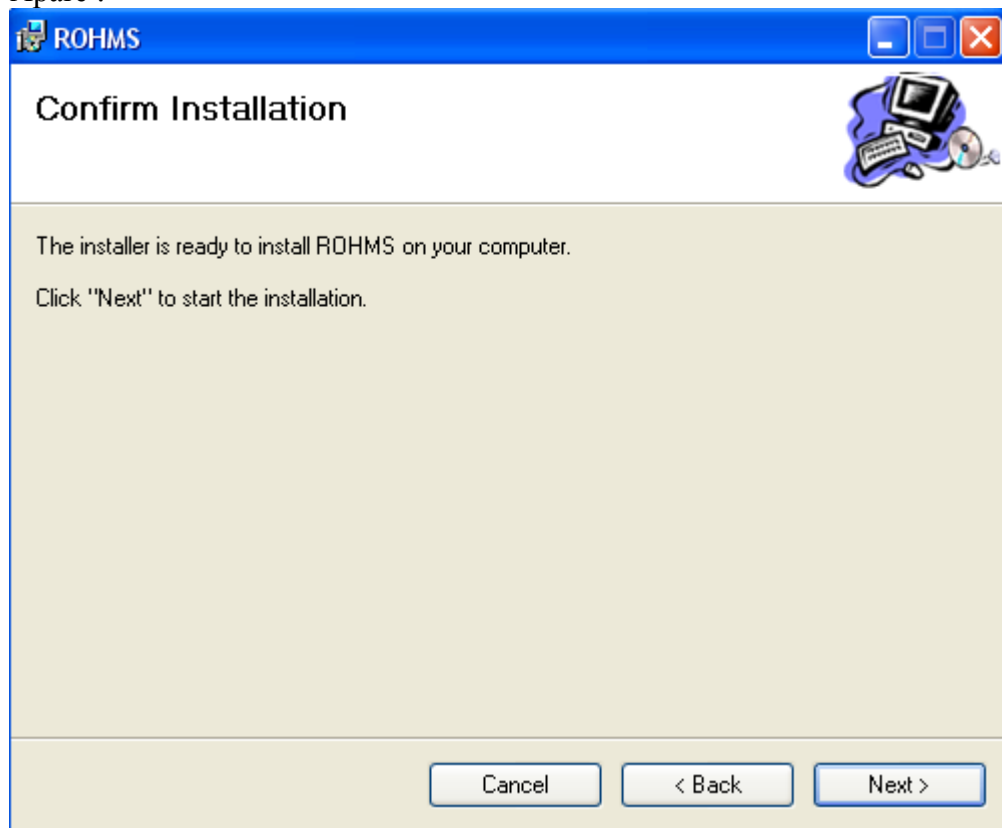


Se execută click pe **Next**.

Apare :

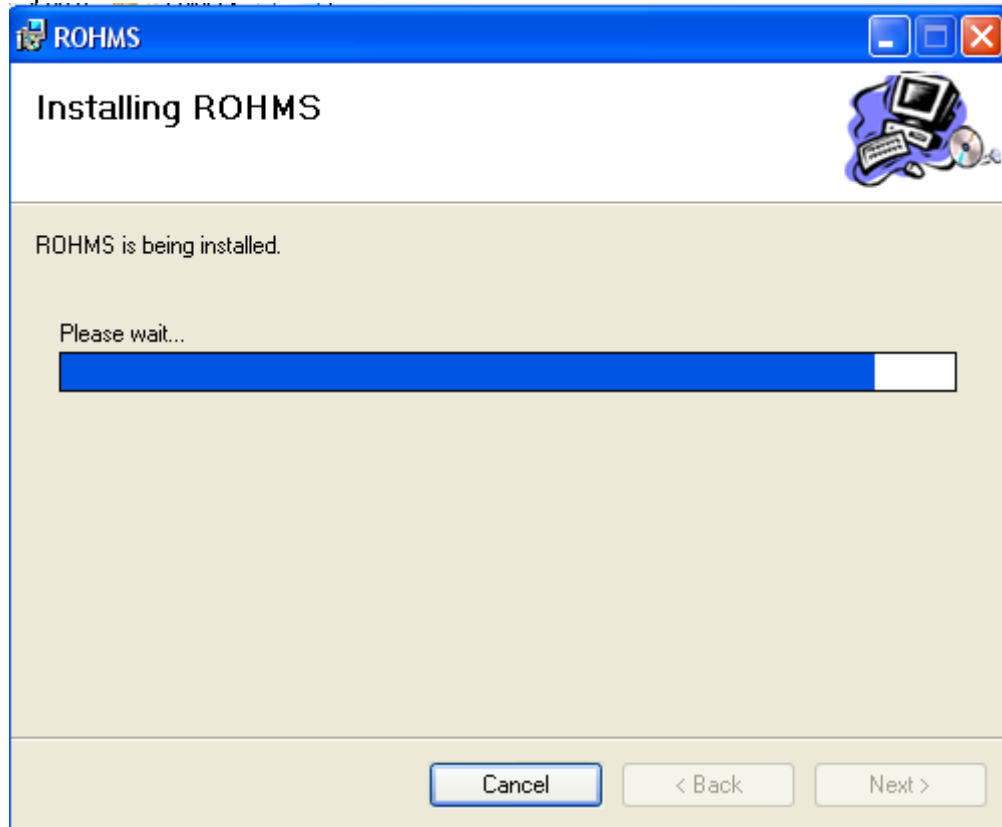


Apoi apare :

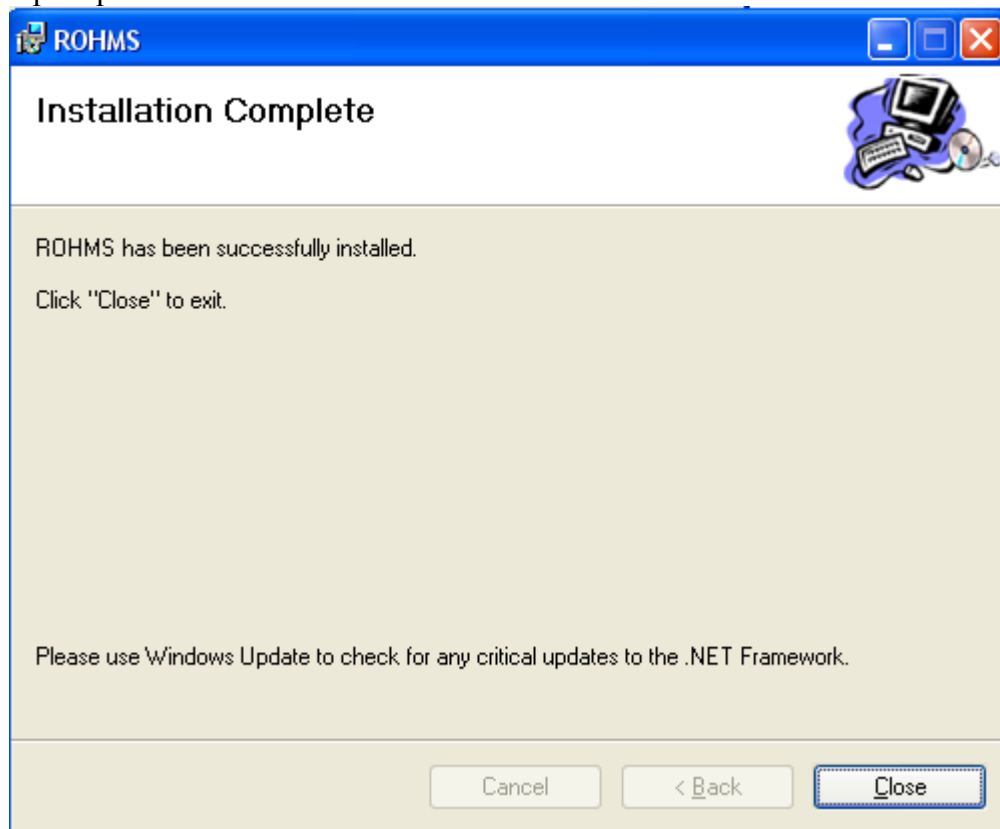

Se execută click pe **Close**.

Se revine automat în folder-ul 4 ROHMS

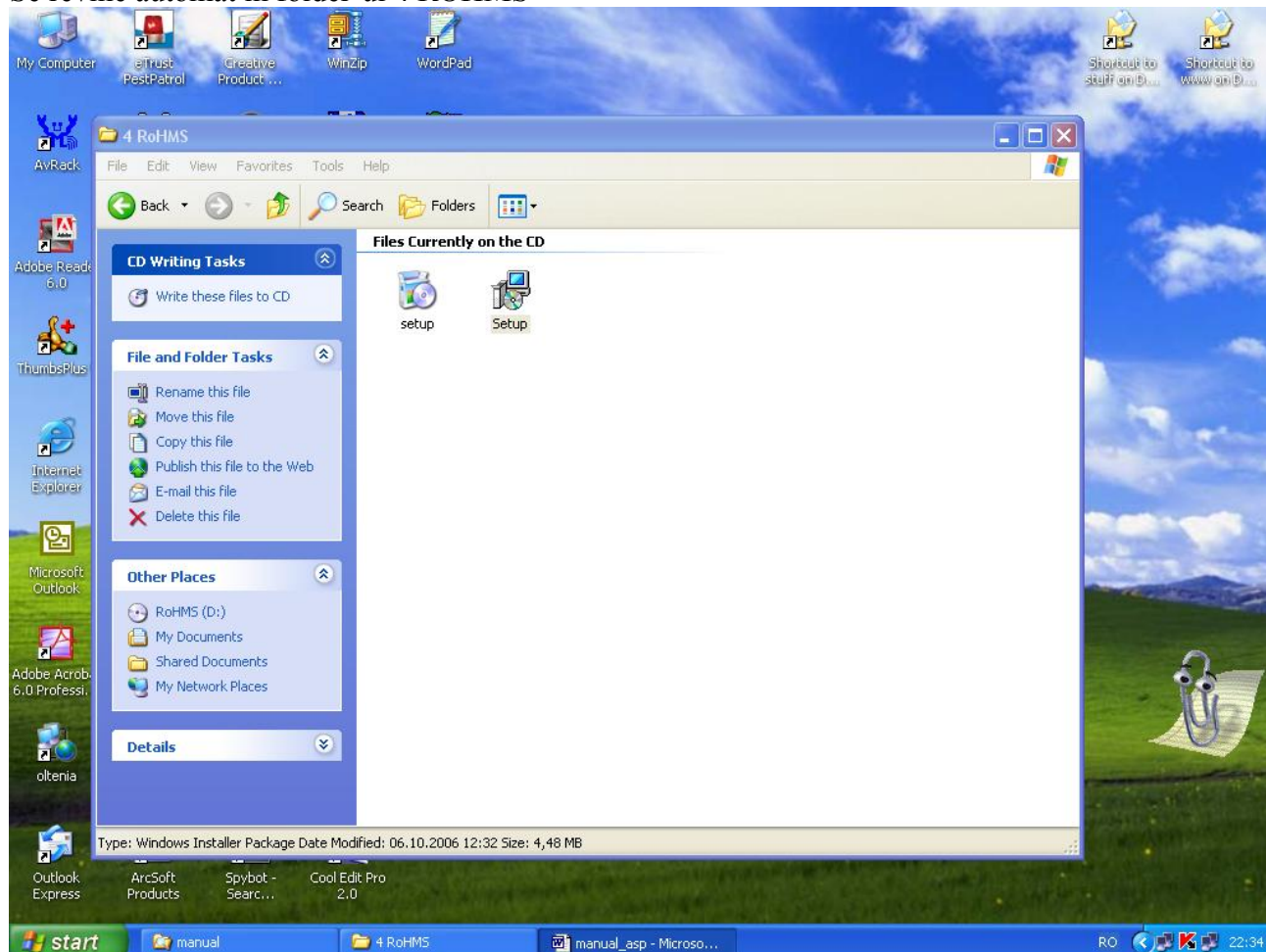


Aplicația este instalată.


Înainte de deschiderea aplicației, trebuie să se configureze setările confor capitolului Setare SQL Server 2005

Setare SQL Server 2005

Setări SQL Server Configuration Manager

Din Start – All Programs – Microsoft SQLServer 2005 – Configuration Tools – SQL Server Configuration Manager se deschide forma și se bifează conform exemplului :

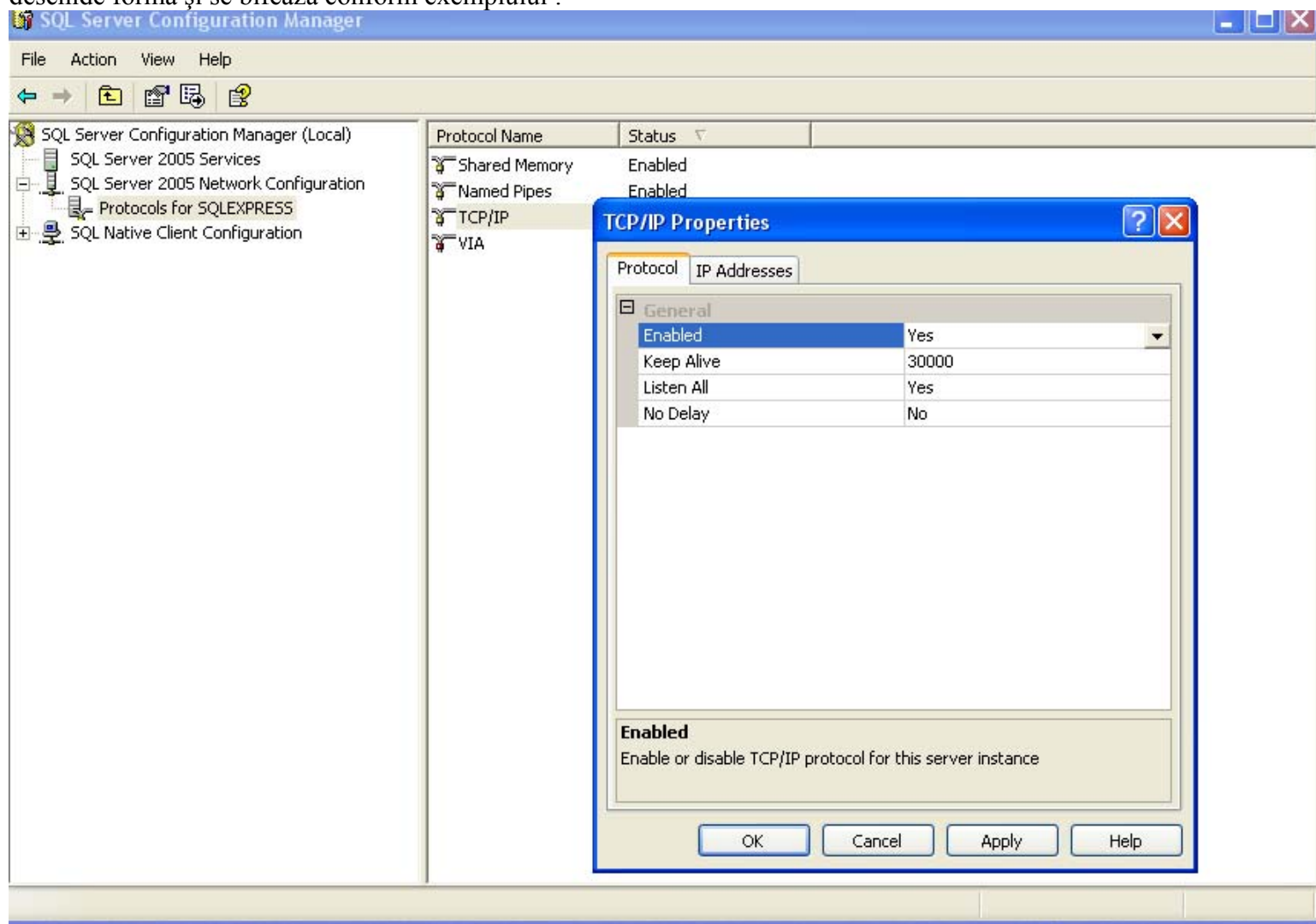


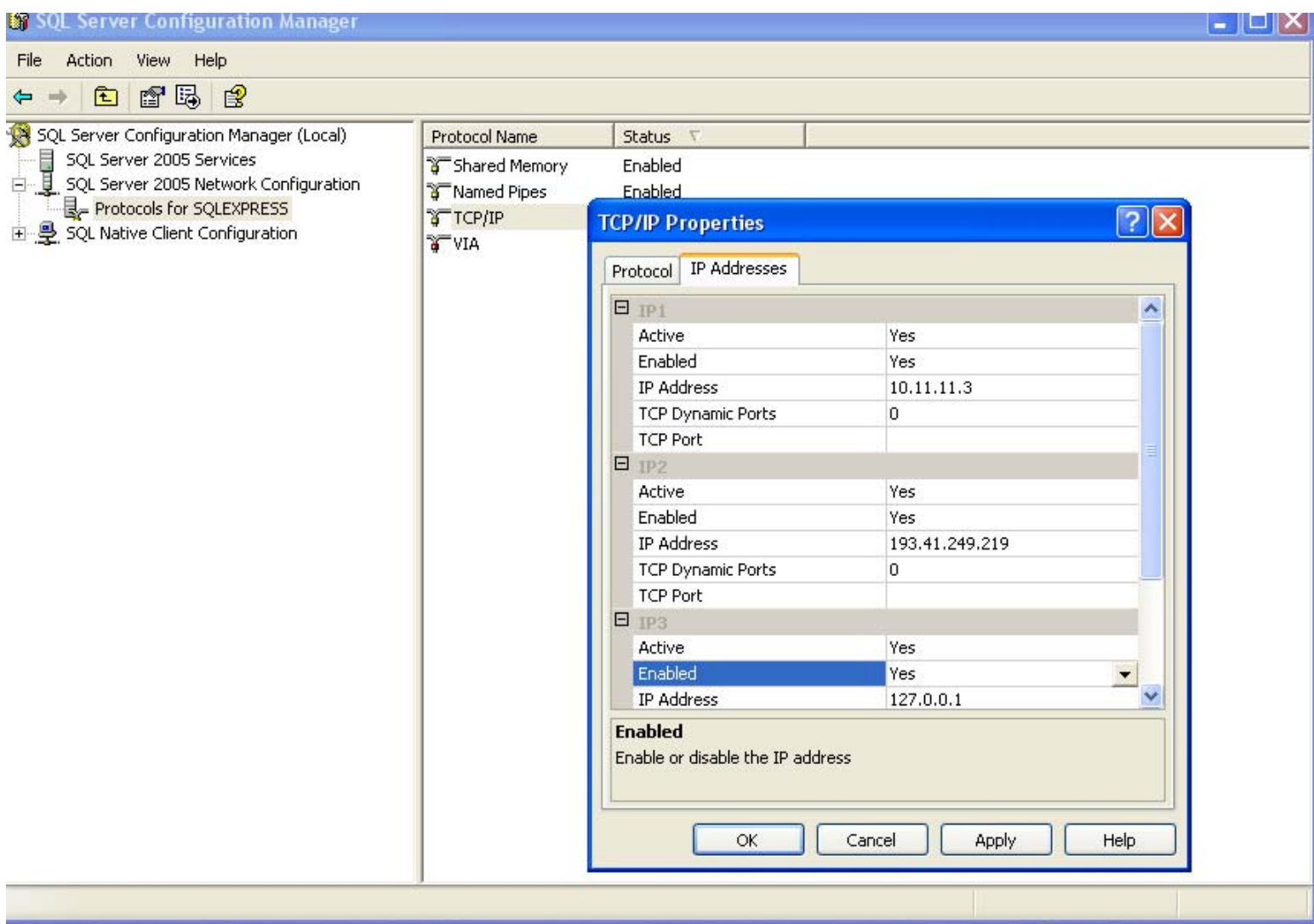


Se apasă butonul **Apply**, se primește mesaj și se apasă **OK**.

Aceiași pași trebuie urmați și pentru opțiunea **Name Pipes**, se selectează **Enabled, Yes**, se apasă butonul **Apply** și apoi **OK**.

Se dă click pe **SQL Server 2005 Services**, se dă click dreapta pe **SQL Server Browser-Properties-Service**, în fereastra care se deschide la **Start Mode** se pune pe **Automatic** – **Apply** – **OK**.

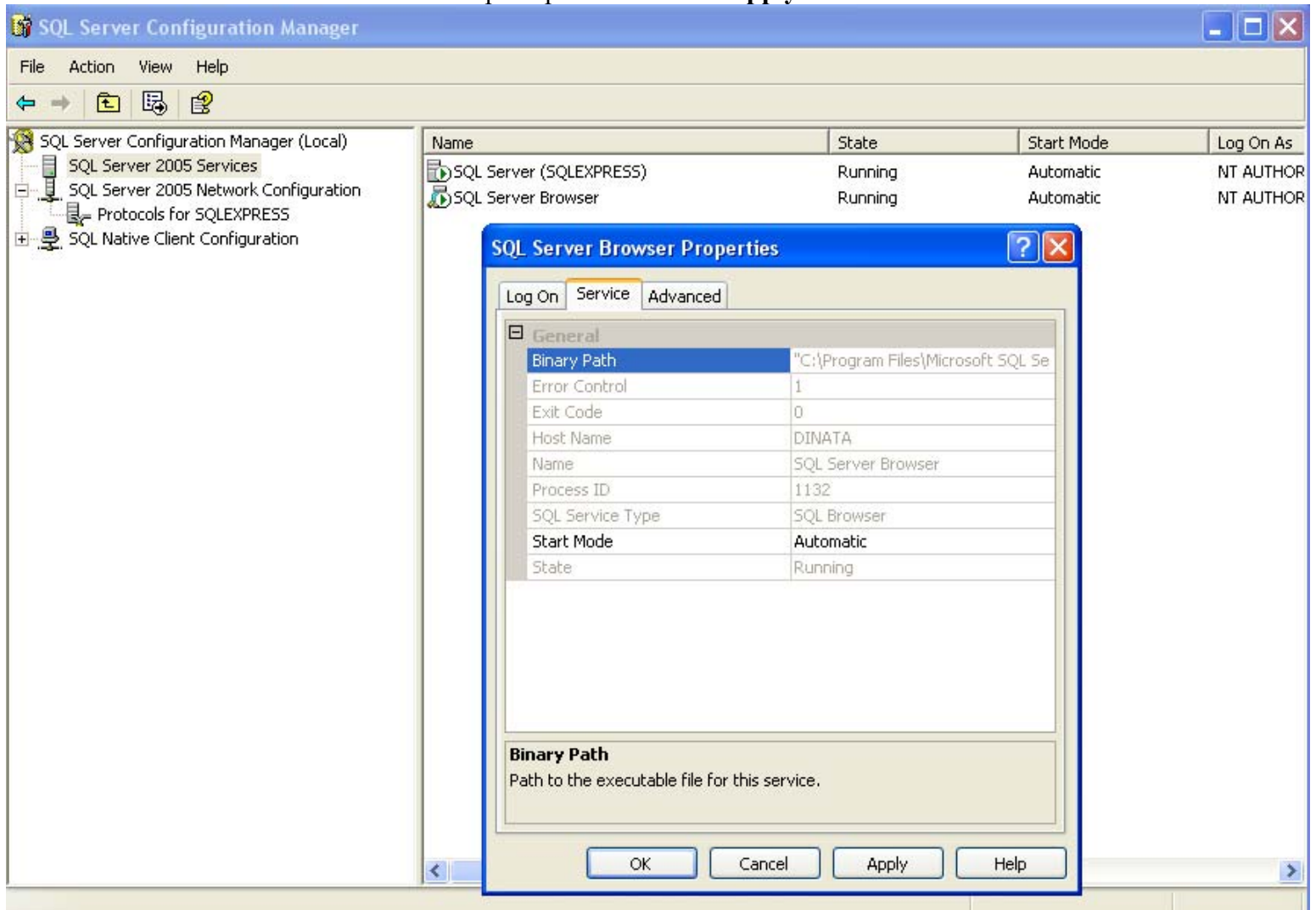

După ce se pune pe **Automatic** se dă click dreapta pe **SQL Server Browser** și se apasă butonul **Start**.

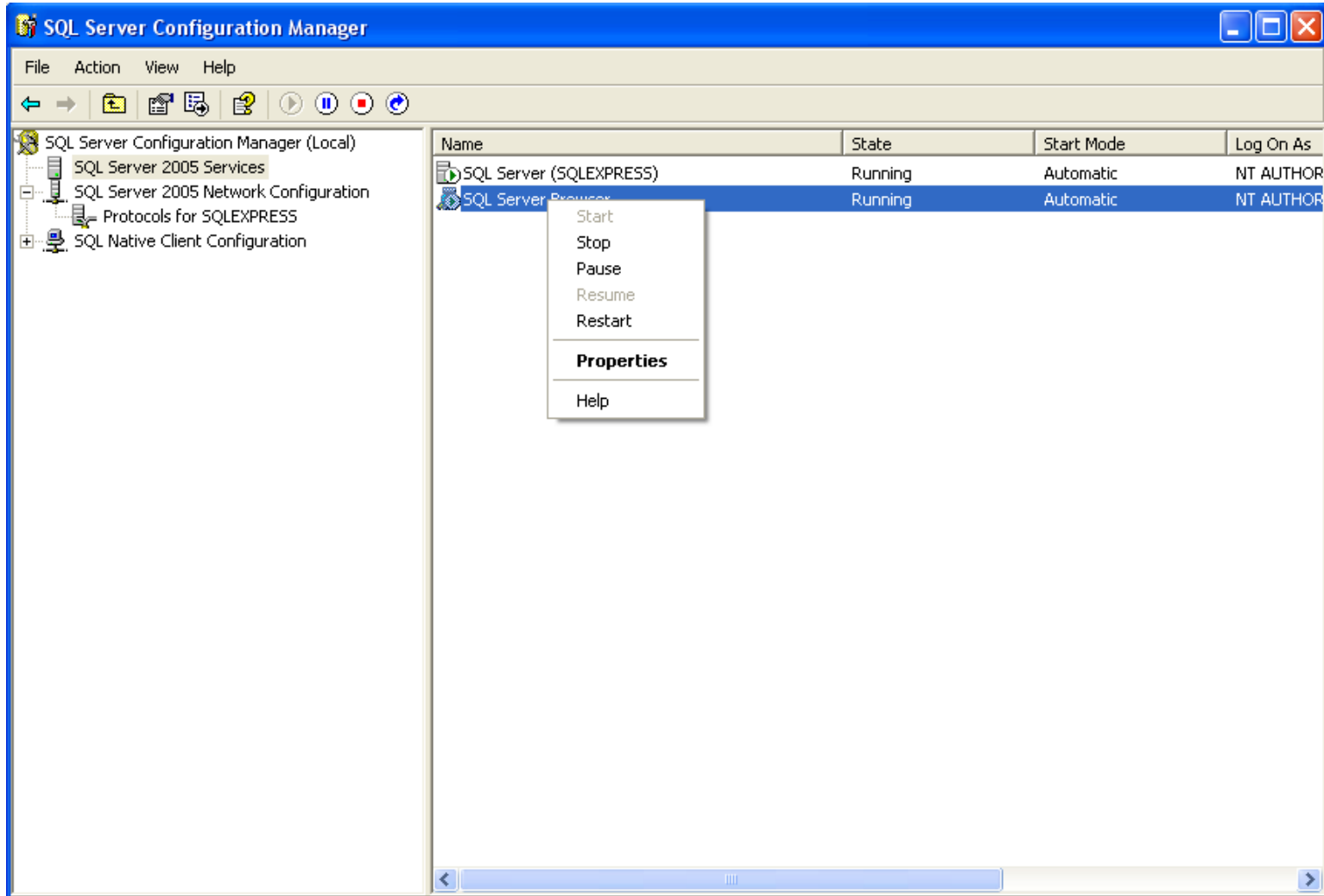


Setări SQL Server 2005 Surface Area Configuration

Se urmează calea Start – All Programs – Microsoft SQL Server 2005 – Configuration Tools – SQL Server 2005 Surface Area Configuration



Setări Surface Area Configuration FOR Services and Connections

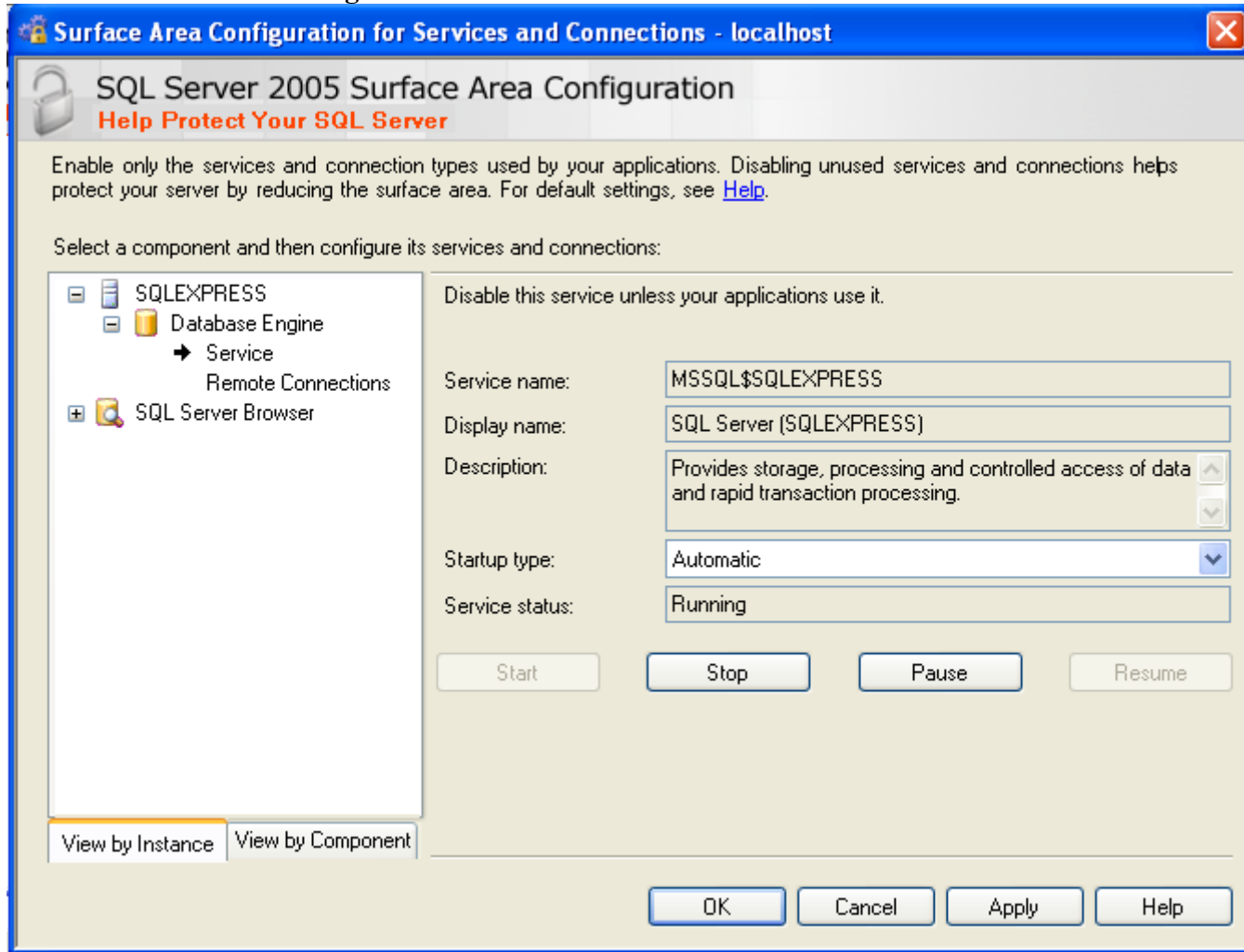


Se apasă butonul **Stop** și se așteaptă să se încarce fereastra, după care se apasă butonul **Start**

Se selectează **Remote Connections**, se bifează **Local and Remote Connections** și se selectează **Using Both TCP/IP and named pipes**.

Se apasă butonul **Apply**, **OK**.

Setări Surface Area Configuration for Features

Se bifează pentru fiecare **Database Engine** – opțiunea din partea dreaptă, ca în exemplul de mai jos.

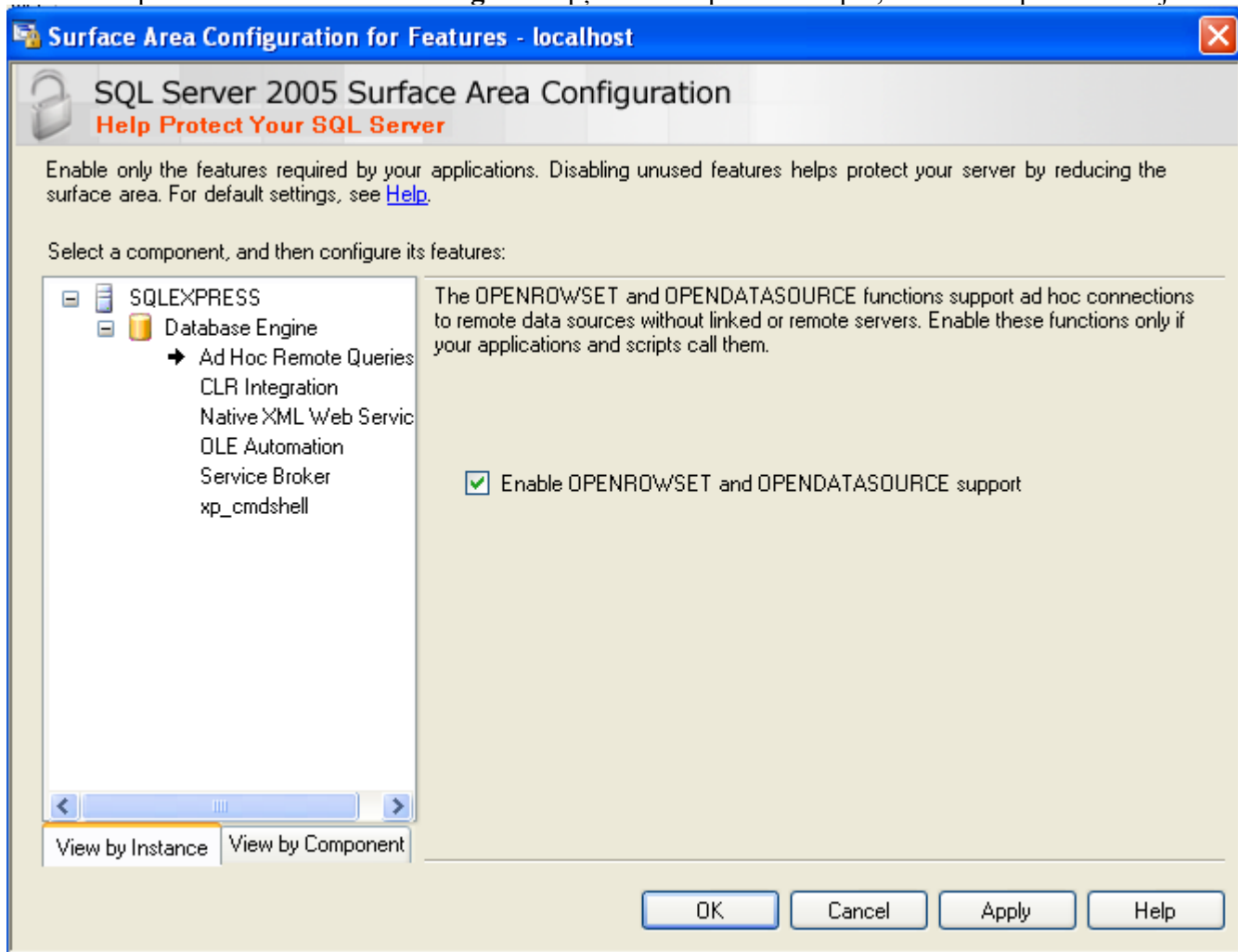

Este necesar să se selecteze pentru

- **Ad Hoc Remote Queries** – se bifează : **Enable OPENROWSET and OPENDATASOURCE support**
- **CLR Integration** – se bifează **Enable OLE Automation**
- **xp_cmdshell** – se bifează **Enable xp_cmdshell**

După ce s-au selectat toate se apasă butonul **Apply** și **OK**

Instalare client

După instalarea serverului, pentru a porni aplicația pe stația de client, se instalează **Frame Work.Net2.0** și aplicația **RoHMS**. Se apasă butonul **Next**. În funcție de ce se dorește a se instala (server sau client) se bifează opțiunea, se apasă butonul **Next**, în fereastra care se deschide se selectează **Everyone** (nu se schimbă calea la instalare) și se apasă **Next – Next – Close**.


Cele două module se instalează din **Setup** (dublu click și începe instalarea). După instalare, se deschide aplicația **RoHMS**, se va deschide fereastra de selectare server, se selectează server-ul și se introduce parola : **rohmsrohms** și user : **sa**, se apasă butonul **Testează conexiunea**, se apasă **Salvează** și butonul **Continuă**.

LANSAREA APLICAȚIEI

Din **Start – All Programs – RoHMS Medical – RoHMS Medical** (sau de pe **Desktop**) se deschide aplicația.



Imediat se va afișa o fereastră de login. Pentru a intra în aplicație se introduce în sistem user+ul și parola cu care se dorește a se intra în aplicație :

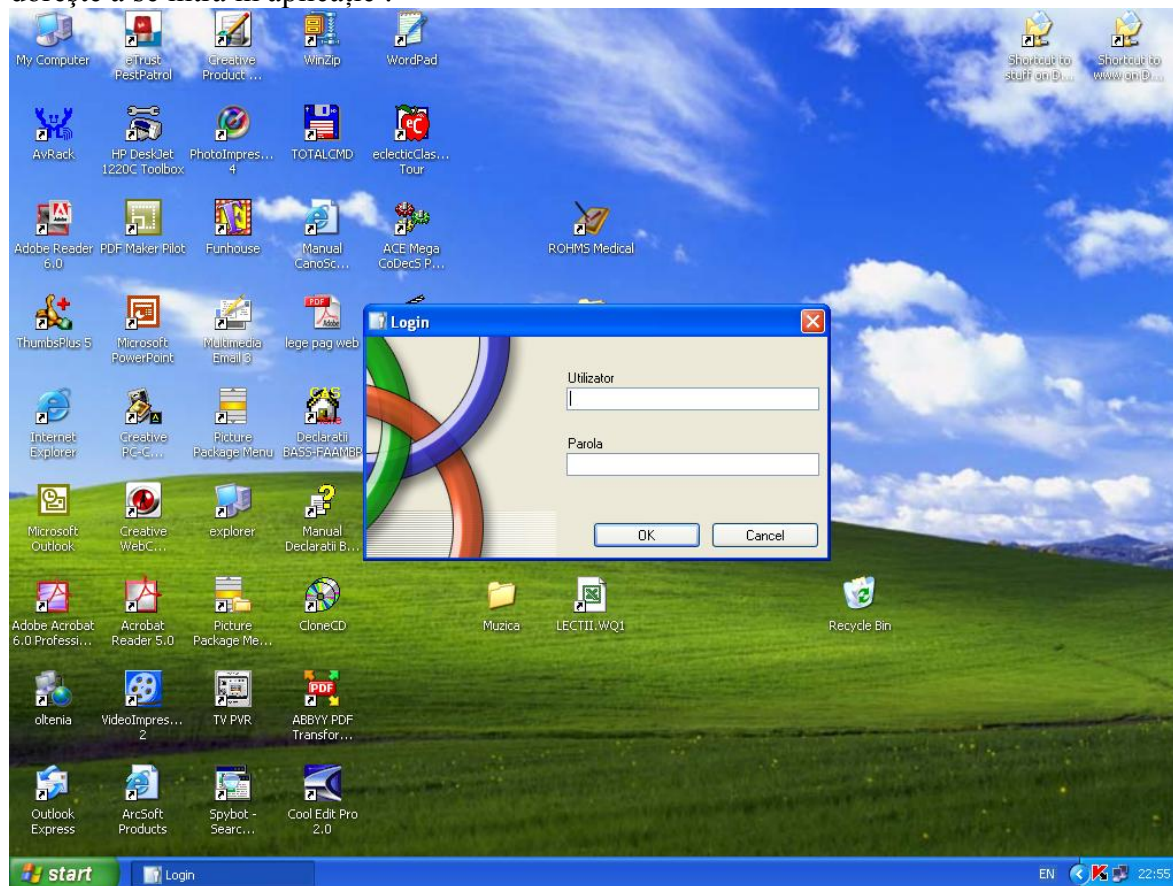

Fereastra de date aferentă medicului și cabinetului :

Date personale medic

Nume:	<input type="text"/>	Prenume:	<input type="text"/>
Cod medic:	<input type="text"/>	CNP:	<input type="text"/>
Specialitatea:	<div>Medic de Medicina de Familie</div>		
Status medic:	<div>Activ</div>		
Centru judetean:	<div>Alba</div>		
Denumire cabinet:	<input type="text"/>	<div>...</div>	
Adresa:	<input type="text"/>		
Localitatea:	<input type="text"/>	Cod postal:	<input type="text"/>
Judetul:	<input type="text"/>	Tara:	<div>RO</div>
Telefon:	<input type="text"/>		
Casa de asigurari / Nr. contract:	<input type="text"/>		
Utilizator:	<input type="text"/>	Parola:	<input type="text"/>
		Confirmare parola:	<input type="text"/>

Adauga

Modifica

Salveaza

Renunta

Inchide

Fereastra de date aferentă pacientului :

ROHMS - [Adaugare pacient]

Administrare Ferestre Ajutor

Nr. fisă: Număr carnet de sănătate:

Nume: Prenume:

CNP: Carte de identitate:

Intrat în evidență: 23.10.2006 Grupa sanguină: RH:

Data nașterii: 23.10.2006 Varsta: Înălțimea: (m)

Stare civilă: Casătorit(a) Greutatea: (kg)

Telefon: Sex:

Adresă:

Localitatea: Cod poștal:

Județul: Țară:

Profesia: Locul de muncă:

Categorie: Beneficiar ajutor social

Stare medicală: Normal Institutionalizat: ☐

CJAS:

Observații:

Ieșit din evidență: ☐ Motiv: La data: 23.10.2006

Tip consultație: Consultație

Tip de antecedent

☒ Personal

☐ Heredocolateral


Salvează Renunță

Listează Închide

Status

start ROHMS - [Adaugare ...] EN 01:57

Aplicația pune la dispoziție, prin meniul **Administrare** o serie de date :

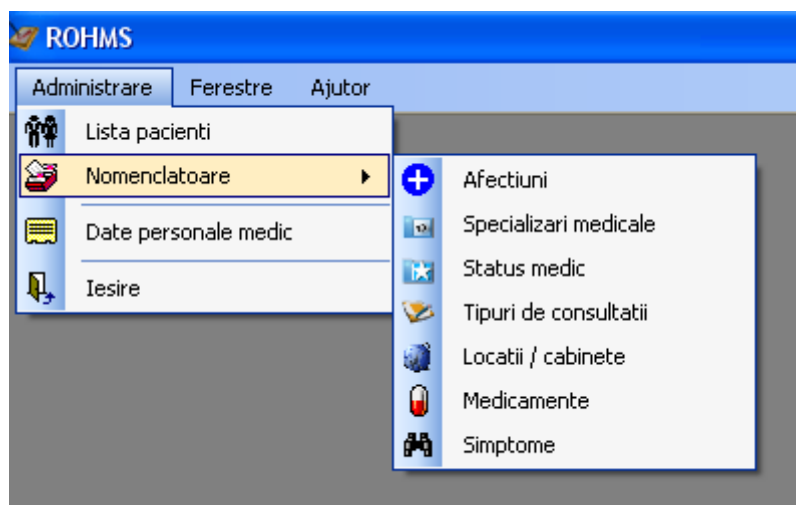

Aspectul nomenclatorului de medicamente :

Medicamente

	Cod	Denumire	Denumire comerciala	Forma de distribuie	Concentra
▶	A10BF01	ACARBOSUM	GLUCOBAY 50	COMPR.	50mg
	A10BF01	ACARBOSUM	GLUCOBAY 100	COMPR.	100mg
	A10BF01	ACARBOSUM	GLUCOBAY 50mg	COMPR.	50mg
	A10BF01	ACARBOSUM	GLUCOBAY 100...	COMPR.	100mg
	A10BA03	BUFORMINUM	SILUBIN RETARD	DRAJ. RET.	100mg
	A10BA03	BUFORMINUM	SILUBIN RETARD	DRAJ. RET.	100mg
	A10BD02	COMBINATII	GLIBOMET	COMPR. FILM	400mg+2.!
	A10BD02	COMBINATII COMBINATII(GLIBENCLAMIDUM+	GLIFORMIN	COMPR. FILM.	400mg+2.!
	A10BB01	GLIBENCLAMIDUM	GLIBENCLAMID ...	COMPR.	3.5mg
	A10BB01	GLIBENCLAMIDUM	GLIBENCLAMID ...	COMPR.	1.75mg
	A10BB01	GLIBENCLAMIDUM	MANINIL	COMPR.	1.75mg
	A10BB01	GLIBENCLAMIDUM	GLIBENCLAMID ...	COMPR.	5mg
	A10BB01	GLIBENCLAMIDUM	MANINIL	COMPR.	3.5mg
	A10BB01	GLIBENCLAMIDUM	GLIBENCLAMID ...	COMPR.	3.5mg
	A10BB01	GLIBENCLAMIDUM	MANINIL	COMPR.	5mg

<

>

Categoria:

DIABET ZAHARAT SI BOLI DE NUTRITIE

▼

< Implicit

(Cauta dupa...)

Denumire: DIABET ZAHARAT SI BOLI DE NUTRITIE

Cod: G.21.

Observatii: Medicamentele vor fi asigurate prin farmaciile apartinand unitatilor sanitare prin care se deruleaza subprogramul national

Inchide